



Provided for your reference by

**cpapXchange.com**

**EN**

## DeVilbiss® IntelliPAP™ Positive Airway Pressure Device

DV5I Standard CPAP Series

**CAUTION**—Federal (U.S.A.) law restricts this device to sale by, or on the order of a physician.

Assembled in USA of US & Imported Parts. Latex Free. Instruction Guide

**ES**

## Dispositivo de presión positiva en las vías respiratorias IntelliPAP™ de DeVilbiss®

Serie DV5I Standard CPAP

**PRECAUCIÓN:** La ley federal de EE. UU. limita la venta de este dispositivo a médicos o a personas que dispongan de la correspondiente orden médica.

Montaje efectuado en EE. UU. con piezas fabricadas en EE. UU. e importadas. UU. Sin látex. Guía de instrucciones

**FR**

## Appareil de ventilation spontanée en pression positive IntelliPAP™ de DeVilbiss®

DV5I Standard CPAP Series

**ATTENTION**—En vertu de la loi fédérale américaine, cet appareil ne peut être vendu que par un médecin ou sur ordonnance de ce dernier.

Assemblé aux États-Unis avec des pièces des États-Unis et des pièces importées. Sans latex. Guide d'instructions

<b>EN</b> ENGLISH.....	3
<b>ES</b> ESPAÑOL.....	25
<b>FR</b> FRANÇAIS .....	49

## TABLE OF CONTENTS

Symbol Definitions .....	3
Important Safeguards .....	3
Introduction.....	5
Intended Use/Indications for Use.....	5
Contraindications.....	5
What Is Obstructive Sleep Apnea (OSA).....	5
How CPAP Therapy Works.....	6
Acclimating To Your Therapy.....	6
Benefits Of Your Therapy.....	6
Helpful Resources .....	7
Key Features.....	8
Unpacking The Contents .....	8
IntelliPAP Device.....	8
Keypad.....	8
System Assembly without Humidification.....	9
Keypad and Display .....	9
Operation.....	10
Start Up.....	10
Using The Comfort Delay Feature.....	10
Shut Down .....	11
Advanced Menu Controls .....	11
Advanced Menu List.....	11
Enable Menu List.....	12
CPAP Patient Menu.....	13
Patient Messages .....	13
Reminders .....	14
Notifications .....	14
IntelliPAP Travel Information.....	14
IntelliPAP DC Operation.....	15
Battery Power.....	15
Supplemental Oxygen .....	15
Accessories/Replacement Items.....	17
Maintenance .....	18
Cleaning.....	19
Troubleshooting.....	20
Specifications .....	22
Warranty.....	23

## SYMBOL DEFINITIONS



Class II electrical protection—double insulated



Type BF equipment— applied part



Data Port Input/Output



Standby – turns the blower on or off



Next Item on LCD display



Increase value shown on LCD display



Previous Item on LCD display



Decrease value shown on LCD display



Attention - Consult Accompanying Documents



Heat



DC Input: 12 VDC, center pin is positive



100 – 240 Volts AC input 50/60 Hz



Locked



Unlocked



IPX1 IPX1 Drip-Proof, Vertical



Delay – starts the delay cycle, if prescribed



This device contains electrical and/or electronic equipment that must be recycled per EC Directive 2002/96/EC - Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed. Read all instructions before using this device. Important information is highlighted by the following terms.

**DANGER** Urgent safety information for hazards that will cause serious injury or death.

**WARNING** Important safety information for hazards that might cause serious injury.

**CAUTION** Information for preventing damage to the product.

**NOTE** Information to which you should pay special attention.

## PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS DEVICE.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS



### DANGER

**Electric Shock Hazard – Do not use while bathing.**

**Electric Shock Hazard – Do not immerse this device into water or any other liquid.**

**Electric Shock Hazard – Do not attempt to open or remove the enclosure. There are no user-serviceable internal components. If service is required, return the product to your home care provider. Opening or tampering with the product will void the warranty.**



## WARNING

**The DeVilbiss IntelliPAP™ should be used only with masks recommended by DeVilbiss, your physician or respiratory therapist.**

**To avoid rebreathing of exhaled air, do not use a CPAP mask unless the device is turned on and providing a supply of air. Venting in the mask should never be blocked. When the device is turned on and providing a fresh supply of air, exhaled air is flushed out of the mask vent. However, when the device is not operating, exhaled air may be rebreathed. Rebreathing of exhaled air for longer than several minutes can in some circumstances lead to suffocation. This warning applies to most CPAP devices.**

**The DeVilbiss IntelliPAP is not a life support device and may stop operating with certain device faults or with a power failure. It is intended to be used on spontaneously breathing individuals weighing 66 lbs/30 Kg or greater.**

**To avoid electric shock, always unplug power cord from wall outlet power source when performing cleaning.**

**Use only accessories recommended by DeVilbiss.**

**CAUTION**—*The circular data port connector located on the back of the IntelliPAP is used to attach accessories to the device. The connector must only be used with accessories approved for use by DeVilbiss. Do not attempt to attach any other device to this connector as it may damage the CPAP or the accessory device.*

**CAUTION**—*Never rinse or place the device in water. Never allow liquids to get into or around any of the ports, switches or air filter; doing so will result in device damage. If this occurs, discontinue use and remove the power cord from the power source. Allow the device to completely dry before use.*

**CAUTION**—*Do not place the IntelliPAP where it can be bumped onto the floor or where the power cord may create a trip hazard.*

**CAUTION**—*Only the DeVilbiss DV5 series Heated Humidifier system is recommended for use with the IntelliPAP. Other humidifier systems may prevent the device from detecting snoring and may cause inappropriate pressure levels in the mask.*

**CAUTION**—*Oxygen is a prescription gas and should only be administered under the supervision of a physician.*

## INTRODUCTION

### Intended Use/Indications for Use

The DeVilbiss® IntelliPAP™ Model DV5 Series is intended for use in treating obstructive sleep apnea in patients 66 lbs/30 kg and above.

### Contraindication

Do not use IntelliPAP if your upper airway has been bypassed.

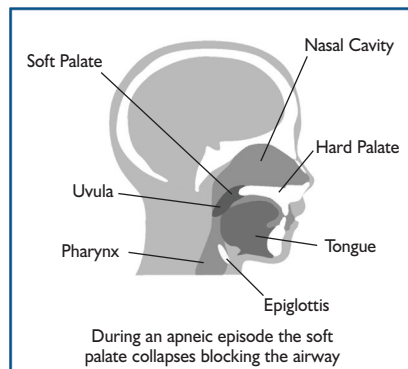
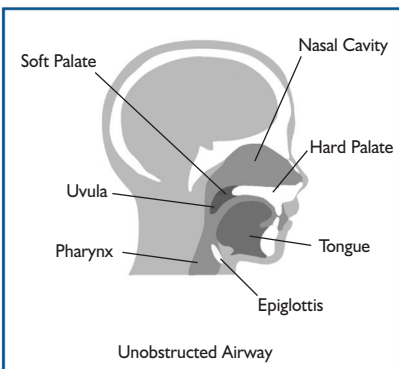
**NOTE**—Symptoms of dryness of the throat, nasal passages, and the mouth are common with positive airway pressure therapy. This is especially true in dry climates and during the cold season when humidity in the air is typically lower than at other times. The IntelliPAP features an optional humidifier system to help minimize these effects.

### What Is Obstructive Sleep Apnea (OSA)?

Obstructive Sleep Apnea (OSA) is a breathing disorder that affects more than 22 million Americans – approximately 4% of middle-aged men and 2% of middle-aged women.

Physiological factors such as size of tonsils, shape of the nose, narrowing of the upper airway, or any combination of these can contribute to the potential for having OSA. During sleep, your airway can relax so much that it begins to collapse and becomes obstructed. Relaxation allows the tissue at the back of your throat to vibrate as you breathe causing snoring. But as your airway collapses more fully, it blocks your airflow and stops your breathing altogether. (In fact, the word “apnea” is derived from a Greek term meaning “without breath.”)

This stoppage occurs repeatedly throughout the night, each episode lasting from just a few seconds to more than a minute. As your blood oxygen level drops to dangerous levels, your central nervous system triggers a sudden gasp for breath, partially awakening you and preventing you from experiencing the sustained, deep sleep your body needs. As a result, it is common to feel fatigued, stressed and irritable the following day – a less-than-optimal and potentially dangerous condition in which to work, drive, and make decisions.



There are important medical concerns as well. OSA starves your heart, brain, and organs of life-sustaining oxygen. Over time, this deprivation can seriously impact your health

potentially resulting in memory loss, impotence, hypertension, coronary disease, strokes, and heart attacks. Recent studies indicate that OSA has the same risk factor for heart disease as smoking, high cholesterol and alcohol, and estimate that as many as 38,000 people a year die from the effects of OSA.

Clearly, OSA is a serious medical condition that requires attention and treatment.

## How CPAP Therapy Works

There are several treatments for OSA including surgery and CPAP therapy. However, CPAP therapy has proven very effective for most patients. CPAP stands for “continuous positive airway pressure” which is exactly what the DeVilbiss IntelliPAP device delivers to your upper airway, acting as an “air splint” to keep the passage open while you sleep.

This reduces or eliminates the obstruction, allowing you to enjoy the deep, refreshing, uninterrupted sleep you need. More importantly, your body will get the rest and oxygen it needs with more continuous, uninterrupted sleep – helping you avoid some of the serious health risks associated with OSA. And the IntelliPAP is designed to provide this therapy to you quietly and comfortably so that you can sleep through the night without distraction.

## Acclimating To Your Therapy

Naturally anything new – including CPAP therapy – takes some getting used to. Having your mouth or nose (or both) covered by a mask may make you feel anxious or claustrophobic. Feeling the rush of air from your IntelliPAP may cause discomfort or concern. But don't worry – every successful, long-term CPAP user began where you are today with the same reactions and concerns, and overcame them to enjoy the full benefits of their therapy.

Here are some steps to help you gradually ease into your therapy and overcome your anxieties:

1. Try attaching the mask to the CPAP unit, and switching the unit “On.” Practice breathing through the mask for one hour while watching television, reading, or performing some other sitting activity.
2. If you nap, use the CPAP during this time.
3. Use CPAP at least during the first initial 3-4 hours of nighttime sleep.
4. Use CPAP through an entire night of sleep.

Advance through the above steps one step at a time and progress to the next step as soon as you can carry out the current step without anxiety.

## Benefits Of Your Therapy

As a DeVilbiss IntelliPAP user, you are on your way to living a happier, healthier life – a life free from the sleep disruptions and health risks associated with OSA. After you become acclimated to CPAP therapy, you may be surprised at how much better you feel, both physically and emotionally. CPAP therapy may give you the opportunity to finally experience the deep, restful sleep you've been missing out on. Many patients find they have more energy, better judgment, and improved concentration during the day. With effective therapy you'll be less stressed, less irritable and more like your old self again, with a healthy, positive

outlook on life. In fact, you may well wish you'd gotten your IntelliPAP sooner!

## Helpful Resources

As you begin your IntelliPAP therapy, remember: you're not in this alone! You're part of a large and growing network of CPAP users, and many resources are available to answer your questions, address your concerns, and help make your therapy as effective and effortless as possible.

### **American Academy of Sleep Medicine**

One Westbrook Corporate Ctr, Ste 920  
Westchester IL 60154  
Phone: (708) 492-0390  
Fax: (708) 492-0943  
[www.aasmnet.org](http://www.aasmnet.org)

### **American College of Chest Physicians**

3300 Dundee Rd  
Northbrook, IL 60062-2348  
Phone: (847) 498-1400 or (800) 343-2227  
Fax: (847) 498-5460  
[www.chestnet.org](http://www.chestnet.org)

### **The Sleep Apnoea Trust**

12a Bakers Piece,  
Kingston Blount  
Oxon.  
OX39 4SW  
Tel: +44 845 60 60 685  
[www.sleepapnoea-trust.org](http://www.sleepapnoea-trust.org)

### **National Heart, Lung & Blood Institute Information Center**

P.O. Box 30105  
Bethesda, MD 20824-0105  
Phone: (301) 592-8573  
Fax: (240) 629-3246  
[www.nhlbi.nih.gov](http://www.nhlbi.nih.gov)

### **American Academy of Neurology**

1080 Montreal Avenue  
St. Paul, Minnesota 55116  
Phone: (651) 695-2717 or (800) 879-1960  
Fax: (651) 695-2791  
[www.aan.com](http://www.aan.com)

### **American Sleep Apnea Association**

1424 K Street NW, Suite 302  
Washington, DC 20005  
Phone: (202) 293-3650  
Fax: (202) 293-3656  
[www.sleepapnea.org](http://www.sleepapnea.org)

### **National Center on Sleep Disorder Research National Heart Lung & Blood Institute (NIH)**

6701 Rockledge Drive  
Bethesda, MD 20892  
Phone: (301) 435-0199  
Fax: (301) 480-3451  
[www.nhlbi.nih.gov/sleep](http://www.nhlbi.nih.gov/sleep)

### **National Sleep Foundation**

1522 K Street, NW, Suite 500  
Washington, DC 20005  
Phone: (202) 347-3471  
Fax: (202) 347-3472  
[www.sleepfoundation.org](http://www.sleepfoundation.org)

## KEY FEATURES

### Unpacking The Contents

The following items are included in your DeVilbiss IntelliPAP system:

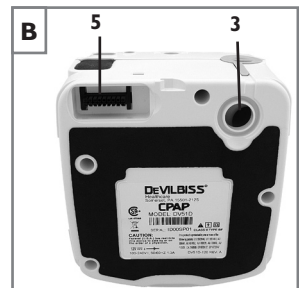
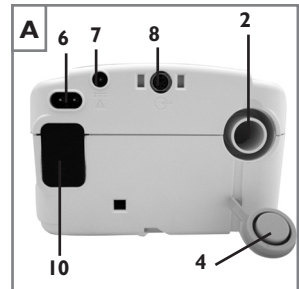
- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. IntelliPAP device | 5. Air supply tubing |
| 2. Spare filter pack | 6. User manual       |
| 3. AC line cord      | 7. DVD               |
| 4. Carrying case     |                      |

If any of the above items are missing, please contact your home care provider.

**NOTE**—If you received a humidifier with your IntelliPAP system, please refer to the humidifier’s instruction guide for additional information.


### DeVilbiss IntelliPAP Device (Figures A and B)

- Keypad/LCD Display (see Figure C)
- Air Supply Port on Back
- Air Supply Port on Bottom (for optional humidifier)
- Air Supply Port Plug
- Heater Power Connector (for optional humidifier)
- AC Power Connector
- DC Power Connector
- Data Port
- Power Cord (appropriate to your wall outlet) (not shown)
- Air Inlet Filter Opening



### Keypad (Figure C)

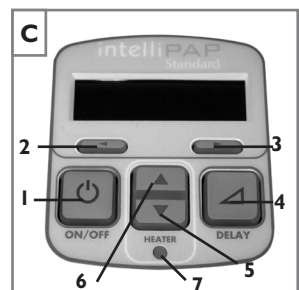- On/Off
- Previous Item
- Next Item
- Delay
- Decrease Value
- Increase Value
- Heater Power LED (for optional humidifier)



Ask your home care provider for information about other DeVilbiss masks, equipment, and accessories.

## SYSTEM ASSEMBLY WITHOUT HUMIDIFICATION

**NOTE**—If your system includes a humidifier, please refer to the instructions provided with the humidifier for assembly and operation.

1. Locate the air supply port and heater accessory connector on the bottom of the IntelliPAP device. Ensure that each opening has the appropriate soft cover securely attached.
2. Place the IntelliPAP on a stable surface such as a nightstand or table. If you wish, you may also place the device on the floor at the bedside, being careful to place the unit where it won't be kicked or stepped on. Ensure that the air inlet in the back of the device is not blocked by anything such as curtains or bedding.

**NOTE**—Never place the IntelliPAP system on a soft surface such as a bed or couch during operation.

**CAUTION**—The height of the IntelliPAP system must always be lower than the interface mask when using a humidifier to prevent water from getting into the CPAP mask.

3. Insert the power cord into the back of the device. Make sure the power cord is fully inserted into the connector. Plug the other end of the power cord into the AC wall outlet.
4. Attach the air supply tubing to the air supply interface in the back of the device.
5. Prepare the mask (supplied by your home care provider) by referring to the mask's instruction guide.
6. Connect the air supply tubing to the mask.

**NOTE**—The air supply tubing supplied with the device is specially designed to prevent kinking and allow you to receive smooth airflow. Use only the 22 mm diameter, smooth-bore, kink-resistant tubing supplied with this device or an air supply tubing recommended by your home care provider.

## Keypad And Display

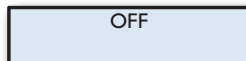
Basic DeVilbiss IntelliPAP Controls		
Name	Symbol	Function
ON/OFF		The ON/OFF button starts and stops the flow of air from the device.
HEATER		If your IntelliPAP has a heater/ humidifier attached, these buttons adjust the heater setting. Increase the setting for more humidity and decrease the setting for less humidity.
DELAY		The Delay button activates the comfort delay feature and only functions if this feature has been enabled. To understand how to set the parameters of this feature, please refer to the Using the Comfort Delay Feature found on page 10.

**NOTE**—The additional control buttons that you see on the IntelliPAP control panel provide advanced controls for specific settings. Please refer to the 'Advanced Menu Controls' section on page 11 for more details.

## OPERATION

### Startup


To begin operation, verify that your IntelliPAP is connected to a 'live' power source. When plugged in, the LCD display should appear as noted.



Put on your CPAP mask and press the ON/OFF button on the keypad to turn on airflow OR put on your CPAP mask and take a few breaths to turn on airflow automatically. The pressure in your mask will rise to the set pressure in about 10 seconds.

**NOTE**—If the device does not automatically start after taking 2-3 breaths, this feature may have been disabled. If Auto ON/OFF is disabled, you must manually press the ON/OFF button to start and stop the device.

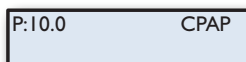The keypad display shows the actual mask pressure while the device is in use. Because this is the actual pressure, the device pressure reading may vary slightly as you breathe. Your display should appear as noted.



If your DeVilbiss IntelliPAP system includes a humidifier, its heater controls and status are displayed as noted in the image.



**NOTE**—If the display on your device is not similar to those listed above, refer to the chapter section titled "Patient Messages" on page 14.

### Using The Comfort Delay Feature

Your IntelliPAP has a comfort delay feature to help make it easier for you to fall asleep. The airflow will start at a low pressure and then gradually ramp-up to the prescribed setting over the last few minutes of the specified delay time.

**NOTE**—When the delay comfort feature is activated, a message will flash on the display periodically, indicating the amount of time remaining in the delay.

You can adjust the amount of time spent in comfort delay by using the advanced device controls. The Delay Time can be adjusted from 0 to 45 minutes in 5-minute increments. Refer to page 11 for details.



**NOTE**—If you are unable to change the delay time, your provider has locked this setting. Refer to the keypad menu guide on page 11 for details.

Press the delay button to activate the comfort delay feature. The airflow pressure will drop to the prescribed comfort delay pressure.

In the final 10 minutes of the delay period, the pressure will gently rise to the pressure prescribed for your therapy. You may repeat the comfort delay by pressing the delay button again if you have not fallen asleep during the first use.

## Shut Down

Press the ON/OFF button to turn the device off. You may also simply remove your mask. After a few seconds the device will display the message “Mask Off. Please check mask fit.” If you do not put the mask on again the device will automatically turn off in about 20 seconds. Pressing any button will remove the message from the display.

**NOTE**—If the DeVilbiss IntelliPAP does not turn off automatically, the feature may have been disabled. In this case you must manually turn the device off.

## ADVANCED MENU CONTROLS

With the device on, press the “Next” or “Previous” buttons on the keypad to scroll through the items on the display. The table shows the items you may see, and describes the feature associated with each item.

Name	Symbol	Function
PREVIOUS ITEM		Pressing this button displays the previous menu option.
NEXT ITEM		Pressing this button displays the next menu option.
SETTING CHANGE		These buttons allow you to adjust the setting that is shown on the display.

Please note that the values displayed are examples only.

## Advanced Menu List

Display Example	Description
	This is the default screen when the IntelliPAP is turned on. The actual mask pressure and heater setting are shown. The displayed pressure may vary slightly while breathing. If the heater system is not connected, the heat setting will be blank.
	This is a prescription setting which controls the operating pressure.
	Selectable delay time setting. Your provider has set the delay time. If the unlocked symbol is shown, you are able to adjust this setting. If the locked symbol is shown, this setting can only be adjusted by your provider.
	This is a prescription setting which controls the operating pressure during the delay time.
	Pressing the down key enters the Enable menu. Refer to next section for Enable Menu details.

Display Example	Description
LCD Contrast Adj 50 %	This setting changes the contrast for the LCD display. This only needs to be adjusted if you find it difficult to see the display from your viewing angle.
Compliance Meter 123456.7 hours	The total number of hours (in 1/10 hour increments) that the IntelliPAP has been providing therapy.
Hourmeter 123456.7 hours	The total number of hours (in 1/10 hour increments) that the IntelliPAP has been in operation.
Firmware Version V0.01 01/06/2006	Shows version of installed firmware.
Serial Number HD123456	Shows the serial number of the device.
SmartCode FF28D9	SmartCode™ is used for therapy management reporting; therapy information is encoded in a series of letters and numbers, and includes a special character for error checking to ensure accuracy.

## Enable Menu List


The Enable menu is available in all modes and is a sub-menu that allows you to control various functions of your IntelliPAP. It is accessed by pressing the down button while in this Advanced Menu.

Display Example	Description
Auto-ON Enabled	This option controls the Auto-ON feature, which automatically starts the flow of air after breathing once or twice into the mask.
Auto-OFF Enabled	This option controls the Auto-OFF feature, which automatically stops the flow of air after taking off the mask. The device may require up to 30 seconds to turn OFF depending on the kind of mask used.
Exit Menu Press ▲	Pressing the up key exits the Enable menu.

## Patient Menu Layout

The following chart shows by Mode each Display you will scroll through using the Next or Previous buttons on the keypad. Pressing the Down key at the Enable Menu Display will allow you to enter this submenu - then use Next or Previous buttons to scroll through it; press the Up button to return to main menu. Once the final Display is reached, pressing the Next button will return you to the first Display.
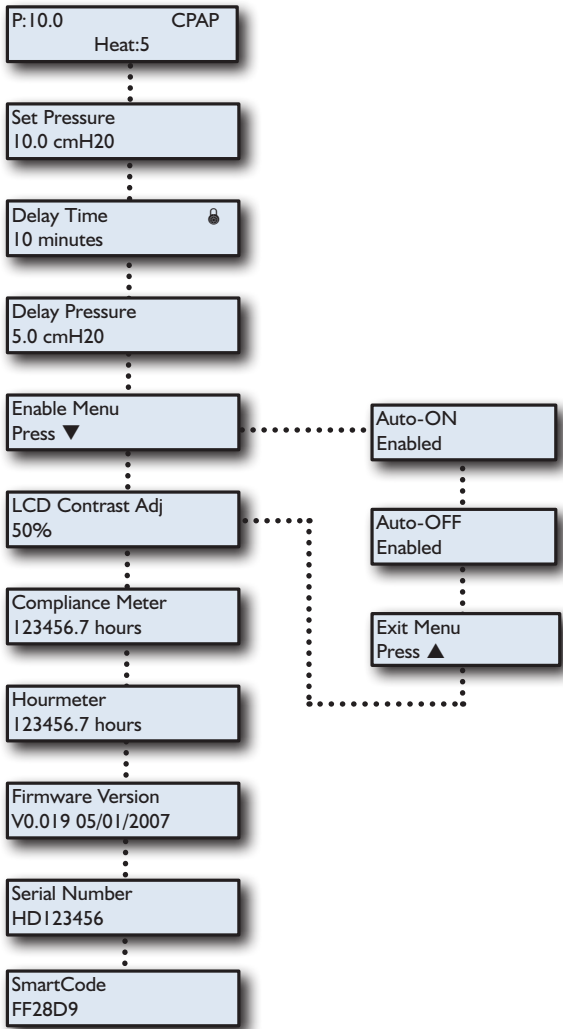
### CPAP MENU



## PATIENT MESSAGES

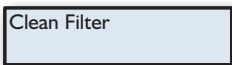
Your IntelliPAP will alert you of issues that may require some action on your part in order to make your therapy more effective. These messages are displayed when the device is turned on, either by pressing the ON/OFF button or by breathing into the mask. You can press any key or button to clear the message from the display, but the IntelliPAP will operate normally even if the message is not cleared.

Two kinds of messages are displayed: Reminders and Notifications.

### Reminders

Reminders alert you when parts of your system need to be replaced. Some components of your system wear over time and, if not replaced, may compromise your therapy. If you see a message on the display that is not listed below, you may have the optional DeVilbiss SmartLink™ Module attached to your device, which provides additional messages. Refer to the documentation that was provided with the SmartLink Module.

**Clean Filter** – The filter should be checked every 10 days for signs of dirt or wear so that it can be cleaned as needed. This message helps to remind you to check it regularly.


A rectangular box with a light blue background and a black border, containing the text "Clean Filter".

### Notifications

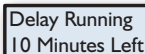
Notifications identify conditions in your IntelliPAP that may require action by you or your home care provider in order to maintain a high level of therapy. If you see a message on the display that is not listed below, you may have the optional DeVilbiss SmartLink Module attached to your device, which provides additional messages. Refer to the documentation that was provided with the SmartLink Module.

**NOTE**—The values displayed are examples only.


**Delay Running xx Minutes Left** – While a comfort delay is active, this message is flashed on the display every 5 seconds to let you know how much time is left in the delay.

A rectangular box with a light blue background and a black border, containing the text "Delay Running 10 Minutes Left".

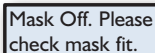**Mask Off** – This message appears whenever a high airflow condition occurs. High airflow is normally due to a poor mask fit or a removed mask. Check for leak around the mask seal and make adjustments as necessary according to the mask manufacturer's instructions. This message will be displayed until the high airflow problem is corrected. If the high airflow condition persists for about 20 seconds, the device will automatically turn off (if AutoOFF is enabled).

A rectangular box with a light blue background and a black border, containing the text "Mask Off. Please check mask fit.".

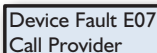**Device Fault** – If a device fault message is displayed, refer to Troubleshooting for instructions.

A rectangular box with a light blue background and a black border, containing the text "Device Fault E07 Call Provider".

## INTELLIPAP TRAVEL INFORMATION

### International Power Changes

Your DeVilbiss IntelliPAP is equipped with a universal power supply. This means that it is automatically capable of accepting line voltages of 100 to 240V~ 50/60Hz. You do not need

to make any adjustments to the device if you are traveling to another country where the line voltage is different than your domestic line voltage. Simply contact your home care provider for the correct style power cord for the region in which you will be traveling (refer to Accessories/Replacement Items for the correct part number).

## Altitude

Your IntelliPAP automatically compensates for changes in altitude between sea level and 9000 ft (2750 m). You do not need to make adjustments to the device for changes in altitude.

## INTELLIPAP DC OPERATION

### Battery Power

Your IntelliPAP can be operated from a 12V DC power source in a motor home, boat or other recreational vehicle. The power source can be used with a 12V DC accessory cable or a 12 V DC stand-alone battery. Both parts are available from your home care provider (refer to Accessories/Replacement Items for the correct part numbers). Both accessory cables are required for stand-alone battery operation. The stand-alone battery connection uses clamps that attach to the terminal connections of the battery.

**NOTE**—The heater for the IntelliPAP's humidification system will not operate directly from a 12V DC power source. If you need humidification, passover humidification is still available. Alternately, instead of connecting 12V DC power directly to the IntelliPAP, you can pass the DC power through an inverter that will deliver AC power to the system. This will allow the heater to function. The power rating of the inverter must be at least 200 watts @ 110V~ / 400 watts @ 220V~.

**NOTE**—The IntelliPAP will automatically switch power sources between AC and 12V DC if both sources are available. If your unit is connected to both AC and 12V DC power sources, it will operate on AC power as long as AC power is present, and automatically switch to 12V DC power if AC power is lost. When AC power is restored, it will return to the AC source. You do not need to reset or adjust any settings when the power source switches, but remember that your heater will not operate on 12V DC.

## SUPPLEMENTAL OXYGEN

Supplemental oxygen is sometimes prescribed in addition to CPAP for treatment of Obstructive Sleep Apnea. If your physician prescribed oxygen for your sleep therapy, you can add the oxygen in one of two ways:

1. Obtain the optional oxygen adapter (part #7353D-601) from your home care provider and connect it to the outlet port on the IntelliPAP. Connect one end of the air supply tubing to the open end of the adapter and the other end of the air supply tubing to the mask.
2. If your mask is equipped with an oxygen port, your physician may request that you apply oxygen directly to your mask.

**WARNING-OXYGEN USE**

Oxygen supports combustion. To avoid possible physical injury, do not smoke while using this device with supplemental oxygen. Do not use this device near hot objects, volatile substances or sources of open flames.

Always turn on the IntelliPAP before turning on the oxygen source. Turn the oxygen source off before turning off the IntelliPAP.

This device is not suitable for use in the presence of a flammable anesthetic mixture with air or oxygen, or nitrous oxide.

At a fixed flow rate of supplemental oxygen, the inhaled oxygen concentration will vary depending on the pressure setting, patient breathing pattern, mask selection, and leak rate. This warning applies to most types of CPAP devices.

Never allow the oxygen source to run continuously while connected to the IntelliPAP if the device is not in use. If the IntelliPAP is not being used, turn off the oxygen flow.

**CAUTION**—Oxygen is a prescription gas and should only be administered under the supervision of a physician.

**CAUTION**—The flow setting of the oxygen source must be specified by a physician.

## ACCESSORIES/REPLACEMENT ITEMS

### Replacement Items

Air-inlet filter (4/pk) .....	DV51D-602
Optional fine particle filter (4/pk) .....	DV51D-603
Air supply tubing (6') .....	7351D-616
Air supply plug .....	DV51D-604
Heater connection cover .....	DV51D-605
Oxygen adapter .....	7353D-601
Carrying case .....	DV51D-610

### Power Items

AC power cords	
USA .....	DV51D-606
Europe, except U.K. ....	DV51D-607
U.K. ....	DV51D-608
Australia .....	DV51D-609
DC power cord .....	DV51D-619
DC battery clamp-on adapter .....	DV51D-696

### Masks Recommended For Use With The DeVilbiss IntelliPAP:

DeVilbiss FlexSet® Mask .....	9354D
DeVilbiss FlexSet® Shallow Mask .....	9354S
DeVilbiss FlexSet® Gel Mask .....	9354G
DeVilbiss FlexSet® Gel Shallow .....	9354GS
DeVilbiss FlexAire® Mask .....	9353D
DeVilbiss FlexAire® Shallow Mask .....	9353S
DeVilbiss Serenity® Mask .....	9352D
DeVilbiss Serenity® Shallow Mask .....	9352S
DeVilbiss Serenity® Gel Mask .....	9352G
DeVilbiss Serenity® Gel Shallow .....	9352GS

### Optional Heated Humidifier

DeVilbiss Heated Humidifier (cradle and chamber) .....	DV5HH
--	-------

## INTELLIPAP MAINTENANCE



### DANGER

**Electric shock hazard – Do not attempt to open or remove the enclosure; there are no user-serviceable components inside. If service is required, contact your home care provider for instructions on obtaining service of your device. Opening or attempting to service your device will void the warranty.**



### WARNING

**If the operation of the device appears to deviate from normal operation or begins to produce unusual sounds, discontinue use and contact your home care provider for assistance.**

**If the device has been dropped, verify functionality of the device. If the device does not function or the enclosure is damaged, discontinue use and contact your provider.**

**If the device does not appear to be functioning properly refer to the Troubleshooting section for instructions.**

**Pressure Accuracy**—The IntelliPAP is designed to provide accurate pressure performance from the factory without additional calibration. No routine service is required for a period of 2 years of use, provided the device is used in accordance with the manufacturer's directions. After 2 years the device should be inspected.

**NOTE**—Some countries require periodic servicing and calibration of this kind of medical device. Contact your home care provider for further information.

**Standard Air-Inlet Filter**—Check the filter every 10 days and clean it if necessary. Replace the filter every 6 months or sooner if it is damaged. The standard filter is designed to filter particles larger than 3.0 microns in size. The IntelliPAP MUST have the standard filter in place during operation.

**Optional Fine Particle Filter**—Check the filter every 10 days, and replace it if it is dirty or damaged; otherwise replace the filter every 30 days. The optional fine particle filter is designed to filter particles as small as 0.3 microns in size and larger.

**Filter Maintenance**—Refer to Cleaning for instructions.

## INTELLIPAP CLEANING



### WARNING

**To avoid electric shock, always unplug the power cord from the wall outlet power source before cleaning.**

**CAUTION**—Never rinse or place the device in water. Never allow liquids to get into or around any of the ports, switches or air filter; doing so will result in product damage. If this occurs, do not use the device. Contact your home care provider for service.

### Device Cabinet

1. Unplug the IntelliPAP from the power source. Wipe the enclosure with a clean, damp cloth every few days to keep the enclosure dust free.
2. Allow the device to dry completely before plugging it into a power source.

### Filters

#### Air-Inlet Filter (Standard)

1. The air-inlet filter should be checked every 10 days and cleaned as necessary. The filter is located in the rear of the device.

**CAUTION**—Proper filter function is important for the operation of the device and to protect the device from damage.

2. To clean, remove the dark outer foam filter from the frame.
3. Wash the filter in a solution of warm water and dishwashing detergent, and rinse with water. Allow the filter to dry completely. If the filter (part #DV51D-602) is damaged, contact your home care provider for a replacement.
4. Ensure the filter is completely dry before installation and use.

#### Fine Particle Filter (Optional)

1. If you have an optional fine particle filter (part #DV51D-603), inspect this filter and replace it if it shows signs of dirt or damage. Do not wash.
2. Install the fine particle filter behind the standard filter.

**NOTE**—If the fine particle filter is not installed first according to the directions, the life of the filter will be reduced requiring more frequent replacement.

### Tubing

The air supply tubing should be cleaned daily. Remove the tubing from the device and mask. Use a mild detergent and water to clean the inside of the tubing. Rinse the tubing and allow to air dry.

### Mask and Headgear

Clean the mask and headgear according to the manufacturer's instructions.

## TROUBLESHOOTING



**DANGER**

**Electric Shock Hazard - Do not remove the device cabinet; there are no user-serviceable internal components. The cabinet should only be removed by a qualified DeVilbiss provider.**

If you are having trouble with the operation of your DeVilbiss IntelliPAP, please refer to the table below for a list of problems with possible causes and remedies. If you are unable to resolve the problem by following the instructions, contact your home care provider for assistance.

Problem	Probable Cause	Remedy
Nothing shows on the display.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Device is not plugged in or the power cord is not fully inserted.</li> <li>2. There is no outlet power.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 a. Verify that power cord is firmly connected to the IntelliPAP and the power outlet.</li> <li>1 b. If you are using a DC power source make sure the cable connections are secure. Verify that your battery is charged.</li> <li>2. Locate a suitable functioning power source.</li> </ol>
The IntelliPAP does not start when breathing into the mask.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Auto-ON feature has been disabled.</li> <li>2. There is no power to the device.</li> <li>3. Breath is not deep enough for the Auto-ON feature to detect.</li> <li>4. You are using a full face mask that has an anti-asphyxia valve.</li> <li>5. The air supply port plug is missing or not fully inserted.</li> <li>6. The humidifier chamber is not fully engaged into the cradle or is missing.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Use the ON/OFF button to start and stop the device.</li> <li>2. Verify that the power cord is firmly connected to the device and the power outlet.</li> <li>3. Breathe deeply in and out to start the IntelliPAP.</li> <li>4. Auto-ON may not work because your exhaled breath escapes through the open valve. Use the ON/OFF button to start and stop the device.</li> <li>5. Make sure the air supply port plug is fully inserted into the unit.</li> <li>6. Slide the humidifier chamber fully into the slot. Verify the latching lever snaps into place.</li> </ol>
The airflow has stopped unexpectedly during use.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Auto-OFF feature has detected large airflow because of loosely fitting mask.</li> <li>2. During use your mouth opens and you begin to mouth breathe.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ensure you have a good mask fit; adjust the mask and headgear as needed.</li> <li>2. Contact your home care provider for a chin strap or different mask which will help prevent mouth breathing.</li> </ol> <p>If problem is not resolved with above remedies, disable Auto-OFF feature in Advanced Menu options.</p>

<b>Problem</b>	<b>Probable Cause</b>	<b>Remedy</b>
The display shows a device fault.	An error has occurred in the device and requires servicing.	Contact your home care provider for service.
Symptoms of OSA have recurred.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air filter may be occluded.</li> <li>2. Sleep apnea condition has changed.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clean or replace the air filter and relocate device away from drapes and other dusty surfaces.</li> <li>2. Contact your physician.</li> </ol>
Your skin becomes irritated where the mask touches your face.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Headgear is too tight or improperly adjusted.</li> <li>2. Your mask may not be properly sized or is not the most appropriate shape for you.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Loosen the headgear to reduce the contact pressure on your face.</li> <li>2. Contact your physician or home care provider.</li> </ol>
Dryness of throat or nose.	Inadequate humidity.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Add a DeVilbiss DV5 Heated Humidifier.</li> <li>2. Increase the heater setting on the humidifier.</li> </ol>
Condensation of water is collecting in the hose causing a gurgling noise.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Your humidification setting is too high.</li> <li>2. The room temperature fluctuates from higher to lower levels through the night.</li> </ol>	Reduce the humidifier heater setting and/or increase the temperature of the room.
Air from flow generator seems to be too warm.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The air filter(s) is/are dirty.</li> <li>2. The air inlet port is blocked.</li> <li>3. The room temperature is too high.</li> <li>4. The IntelliPAP is located near a heater.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Refer to the Cleaning section for instructions on filter maintenance.</li> <li>2. Unblock the air inlet.</li> <li>3. Reduce the room temperature.</li> <li>4. Locate the device away from the heat source so the air being drawn into the device is at room temperature.</li> </ol> <p>If the problem persists contact your home care provider.</p>
Nasal, sinus or ear pain, possibly with runny nose.	You may have a reaction to air flow pressure.	Discontinue use and contact your physician.

## SPECIFICATIONS

Size .....	4.2" H x 6.5" W x 6.9" D (10.7 cm x 16.5 cm x 17.5 cm)
Weight .....	2.7 lbs. (1.22 kg)
Electrical Requirements.....	100-240V~, 50/60 Hz
Maximum Power Consumption .....	65 watts max from AC power source (flow generator only)
Pressure Range .....	3-20 cmH2O
Operating Temperature Range.....	41°F to 104°F (5°C to 40°C)
Operating Humidity Range.....	0% to 95% RH non-condensing
Operating Atmospheric Conditions .....	Sea level to 9,000 feet
Storage & Transportation Temperature Range.....	-40°F to 158°F (-40°C to +70°C)
Storage & Transportation Humidity Range.....	0% to 95% RH non-condensing
Maximum Limited Pressure .....	20 cmH2O under normal use
Sound Level (tested per ISO 17510).....	26 dBA

## Filter Specifications

- Standard Filter > 3.0 micron particles
- Optional Fine Particle Filter > 0.3 micron particles

## Max Flow Rates

- 83 L/m@ 6.5 cmH2O (1/3 max pressure)
- 134 L/m@ 13 cmH2O (2/3 max pressure)
- 163 L/m@ 20 cmH2O (max pressure)
- Pressure Accuracy..... ± 1.0 cmH2O

## Pressure Swings

(cmH2O peak to peak at 500mL tidal volume, sine wave profile)

Breaths per minute	10	15	20
@ 6.5 cmH2O	0.5	0.6	0.9
@ 13 cmH2O	1.0	1.0	1.2
@ 20 cmH2O	1.0	1.0	1.2

# WARRANTY

Warranty..... Three-year limited  
 Equipment classification with respect to protection from electric shock.....Class II  
 Degree of protection from electric shock ..... Type BF Applied Part  
 Degree of protection against ingress of liquids..... IPX I  
 Equipment not suitable for use in the presence of a flammable anesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.  
 Mode of operation ..... Continuous

## Clinical Specifications for Digital Outputs

Pressure.....0 to 25.5 cmH2O ± 0.5

# WARRANTY

The DeVilbiss IntelliPAP device is warranted to be free from defective workmanship and material for a period of three years from date of purchase. Any defective part(s) will be repaired or replaced at DeVilbiss’s option if the device has not been tampered with or used improperly during that period. Make certain that any malfunction is not due to inadequate cleaning or failure to follow the instructions. If repair is necessary, contact your DeVilbiss provider or DeVilbiss Customer Service Department for instructions:

U.S.A. 800-338-1988, 814-443-4881  
 Canada 800-263-3390  
 Europe 44-138-444-6688.

**NOTE**—This warranty does not cover providing a loaner device, compensating for costs incurred in rental while said device is under repair, or costs for labor incurred in repairing or replacing defective part(s).

THERE IS NO OTHER EXPRESS WARRANTY. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY AND TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES ARE EXCLUDED. THIS IS THE EXCLUSIVE REMEDY AND LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL AND INCIDENTAL DAMAGES UNDER ANY AND ALL WARRANTIES ARE EXCLUDED TO THE EXTENT EXCLUSION IS PERMITTED BY LAW. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, OR THE LIMITATION OR EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.



## ÍNDICE

Definiciones de símbolos.....	26
Precauciones importantes.....	26
Introducción.....	28
Uso al que se destina/Indicaciones de uso.....	28
Contraindicaciones.....	28
¿Qué es la apnea obstructiva del sueño (AOS)?.....	28
Funcionamiento de la terapia CPAP.....	29
Familiarizarse con la terapia.....	29
Ventajas de la terapia.....	30
Recursos de utilidad.....	30
Componentes principales.....	31
Desembalaje del contenido.....	31
Dispositivo IntelliPAP.....	31
Teclado.....	31
Montaje del sistema.....	32
Teclado y pantalla.....	32
Funcionamiento.....	33
Inicio.....	33
Uso de la función de retardo de comodidad.....	33
Apagar el dispositivo.....	34
Controles del menú de propiedades avanzadas.....	34
Lista del menú de propiedades avanzadas.....	34
Lista del menú Activar.....	35
Menú del paciente de CPAP.....	36
Mensajes del paciente.....	37
Recordatorios.....	37
Notificaciones.....	37
Información de IntelliPAP en caso de viaje.....	38
Funcionamiento de IntelliPAP con CC.....	38
Alimentación de batería.....	38
Oxígeno suplementario.....	39
Accesorios/Piezas de repuesto.....	40
Mantenimiento.....	41
Limpieza.....	42
Solución de problemas.....	43
Especificaciones.....	45
Garantía.....	47

## DEFINICIONES DE SÍMBOLOS

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Protección eléctrica de clase II: doble aislamiento   |  | Equipo tipo BF – pieza aplicada                      |
|  | Entrada/Salida del puerto de datos  |  | Pausa: enciende o apaga el ventilador                |
|  | Elemento siguiente de la pantalla LCD   |  | Aumenta el valor que se muestra en la pantalla LCD   |
|  | Elemento anterior de la pantalla LCD  |  | Disminuye el valor que se muestra en la pantalla LCD |
|  | Atención - Consultar documentos   |  | Calor adjuntos                                       |
|  | Entrada de CC: 12 VCC, la clavija central es positiva   |  | 100-240 Voltios de entrada CA 50/60 Hz               |
|  | Asegurad  |  | Desaseg  |
|  | IPX1 A prueba de goteo, vertical  |  |  |
|  | Delay – inicia el ciclo de retardo en el modo de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP), si se prescribe  |  |  |
|  | Este dispositivo contiene equipamiento eléctrico y/o electrónico que se debe reciclar conforme a la directiva de la CE 2002/96/EC - Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) |  |  |

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

Siempre que se utilicen aparatos eléctricos, deben tomarse algunas precauciones básicas de seguridad. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este dispositivo. Los siguientes términos precederán a la información importante para resaltarla.

**PELIGRO** Información de seguridad urgente para situaciones peligrosas que pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte.

**ADVERTENCIA** Información de seguridad importante para situaciones peligrosas que pueden provocar lesiones graves.

**PRECAUCIÓN** Información para evitar daños en el producto.

**NOTA** Información a la que debe prestar especial atención.

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO.**

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

**PELIGRO**

**Peligro de descargas eléctricas – No utilizar durante el baño.**

# PRECAUCIONES IMPORTANTES

**Peligro de descargas eléctricas – No sumergir este dispositivo en agua ni en ningún otro líquido.**

**Peligro de descargas eléctricas – No intentar abrir ni retirar la carcasa. No contiene componentes que el usuario pueda reparar o sustituir. Si es necesario reparar el dispositivo, devuelva el producto a su proveedor de servicios de atención sanitaria domiciliaria. Si abre o altera el producto, la garantía quedará anulada.**



## ADVERTENCIA

**El dispositivo IntelliPAP™ de DeVilbiss sólo se debe utilizar con mascarillas recomendadas por DeVilbiss, por el médico o por el terapeuta respiratorio.**

**Para evitar la reinhalación del aire espirado, no utilice la mascarilla de CPAP a menos que el dispositivo esté encendido y suministrando aire. No bloquee nunca la ventilación de mascarilla. Cuando el dispositivo está encendido y suministrando aire, el aire espirado se expulsa por el sistema de ventilación de la mascarilla. Sin embargo, si la unidad de CPAP no está funcionando, es posible reinhalarse el aire espirado. La reinhalación del aire espirado durante más de unos minutos bajo determinadas circunstancias puede provocar asfixia. Esta advertencia se aplica a la mayoría de dispositivos de CPAP.**

**La unidad IntelliPAP de DeVilbiss no es un equipo de soporte vital y puede dejar de funcionar si se producen determinados errores en el dispositivo o si falla el suministro de corriente eléctrica. Está destinado a pacientes con respiración espontánea de peso superior a 30 kg (66 lbs).**

**Para evitar descargas eléctricas, desenchufe siempre el cable de la toma de corriente de la pared antes de limpiar el dispositivo.**

**Utilice sólo accesorios recomendados por DeVilbiss.**

**PRECAUCIÓN**—El conector circular del puerto de datos que se encuentra en la parte posterior del dispositivo IntelliPAP permite conectar los accesorios. El conector sólo se deberá utilizar con accesorios cuyo uso haya sido aprobado por DeVilbiss. No intente adjuntar ningún otro tipo de dispositivo a este conector, ya que podría dañar la unidad o el dispositivo suplementario.

**PRECAUCIÓN**—No enjuague nunca el dispositivo ni lo sumerja en agua. Nunca permita que entre ni haya líquido cerca de los puertos, de los interruptores o del filtro de aire, ya que podrían producirse daños en el dispositivo. Si esto ocurriera, desenchufe el cable de la toma de corriente inmediatamente. Deje que el dispositivo se seque completamente antes de volver a utilizarlo.

**PRECAUCIÓN**—No coloque el dispositivo IntelliPAP donde pueda sufrir una caída o donde alguien pueda tropezar con el cable de corriente.

**PRECAUCIÓN**—Se recomienda usar sólo el sistema humidificador con calentador DeVilbiss DV5 con el dispositivo IntelliPAP. Es posible que otros sistemas de humidificación impidan que el dispositivo detecte los ronquidos y produzcan unos niveles de presión inadecuados.

**PRECAUCIÓN**—El oxígeno es un gas que se prescribe por orden de un médico y se puede administrar únicamente bajo la supervisión de éste.

## INTRODUCCIÓN

### Uso al que se destina/Indicaciones de uso

El uso del dispositivo DeVilbiss® IntelliPAP™ modelo DV5 Serie está indicado para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño en pacientes con un peso igual o superior a 30 kg/66 lbs.

### Contraindicaciones

No utilice el dispositivo IntelliPAP si se le ha practicado cirugía traqueal.

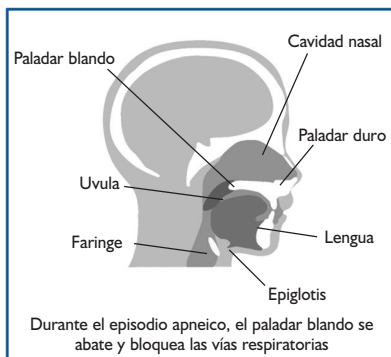
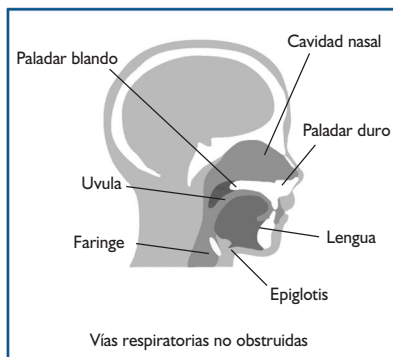
**NOTA:** Algunos síntomas como la sequedad de garganta, fosas nasales y boca son comunes con la terapia de presión positiva continua en las vías respiratorias. Es de especial importancia en zonas geográficas de clima seco y durante el invierno, cuando la humedad del aire suele ser inferior a la del resto de estaciones del año. El dispositivo IntelliPAP incluye un sistema de humidificación opcional que le ayudará a minimizar estos efectos.

### ¿Qué es la apnea obstructiva del sueño (AOS)?

La apnea obstructiva del sueño (AOS) es una afección respiratoria que afecta a más de 22 millones de americanos, aproximadamente el 4% de los hombres y el 2% de las mujeres de mediana edad.

Los factores fisiológicos, como el tamaño de las amígdalas, la forma de la nariz, el estrechamiento de las vías respiratorias superiores o cualquier combinación de los factores anteriores, pueden causar AOS. Durante el sueño, las vías respiratorias se pueden relajar hasta el punto de colapsarse y quedar obstruidas. La relajación hace que el tejido situado en la parte posterior de la garganta vibre al respirar, lo que provoca ronquidos. Pero cuando las vías respiratorias se colapsan por completo, se bloquea el flujo de aire y la respiración cesa. (De hecho, la palabra “apnea” proviene de un término griego que significa “sin respiración”).

Esta suspensión de la respiración se produce de forma repetida a lo largo de toda la noche, pudiendo durar cada episodio desde tan sólo unos segundos hasta más de un minuto. El nivel de oxígeno en sangre desciende hasta límites peligrosos, lo que hace que su sistema nervioso central provoque un jadeo repentino que le despierta parcialmente y le impide disfrutar del sueño profundo y continuo que su organismo necesita. Como resultado, es frecuente sentirse cansado, estresado e irritable al día siguiente, un estado poco recomendable y potencialmente peligroso para trabajar, conducir y tomar decisiones.



También hay consecuencias médicas importantes. La AOS priva al corazón, el cerebro y los órganos del oxígeno que necesitan para sobrevivir. Con el tiempo, esta privación podría tener consecuencias graves para la salud, como pérdidas de memoria, impotencia, hipertensión, enfermedades coronarias, infartos cerebrales y ataques al corazón. Estudios recientes revelan que la AOS presenta el mismo factor de riesgo de sufrir un ataque al corazón que el tabaco, un nivel alto de colesterol y el alcohol, y se estima que se producen hasta 38.000 muertes al año a causa de los efectos de la AOS.

Está claro que la AOS es un problema médico grave que precisa atención y tratamiento.

## Funcionamiento de la terapia CPAP

Existen varios tratamientos para la AOS, entre los que se incluyen la cirugía y la terapia CPAP. Sin embargo, la terapia CPAP ha resultado ser muy eficaz en la mayoría de los pacientes. Las siglas CPAP significan en inglés “Continuous Positive Airway Pressure” (presión positiva continua en las vías respiratorias), que es exactamente lo que suministra el dispositivo IntelliPAP de DeVilbiss a las vías respiratorias superiores, actuando como una “columna de aire” que mantiene las vías abiertas durante el sueño.

Esto reduce o elimina la obstrucción, lo que le permitirá disfrutar del sueño profundo, reparador e ininterrumpido que necesita. Y lo que es más importante, su organismo obtendrá el descanso y el oxígeno que necesita a través de un sueño ininterrumpido y continuo, lo que le ayudará a reducir el riesgo de padecer los graves problemas médicos asociados a la AOS. Además, el dispositivo IntelliPAP está diseñado para proporcionarle esta terapia de una forma cómoda y silenciosa, lo que le permitirá dormir toda la noche sin distracciones.

## Familiarizarse con la terapia

Como ocurre con todo lo nuevo, necesitará algún tiempo para acostumbrarse a la terapia CPAP. Al tener la boca o la nariz (o ambas) cubiertas con una mascarilla, es posible que se sienta inquieto o claustrofóbico. Es posible que el flujo de aire procedente del dispositivo IntelliPAP le haga sentirse incómodo o preocupado. Pero no se preocupe, todas las personas que llevan ya tiempo utilizando la terapia CPAP con éxito tuvieron las mismas reacciones y preocupaciones que usted y, tras superarlas, pudieron disfrutar de todas las ventajas de esta terapia.

Siga estos pasos para acostumbrarse poco a poco a la terapia y superar la ansiedad:

1. Intente conectar la mascarilla a la unidad de CPAP y enciéndala. Practique la respiración a través de la mascarilla durante una hora mientras ve la televisión, lee o realiza cualquier otra actividad sentado.
2. Si ronca, utilice la unidad de CPAP en esos momentos.
3. Utilice la unidad de CPAP al menos durante las primeras 3 ó 4 horas de sueño nocturno.
4. Utilice la unidad de CPAP durante una noche entera de sueño.

Siga estos pasos uno a uno y avance al paso siguiente cuando pueda realizar el paso actual sin sentir ansiedad.

## Ventajas de la terapia

Como usuario del dispositivo IntelliPAP de DeVilbiss, podrá disfrutar de una vida más feliz y saludable, una vida sin las interrupciones de sueño y los riesgos de salud asociados a la AOS. Después de familiarizarse con la terapia CPAP, es posible que se sorprenda de lo bien que se siente, tanto física como emocionalmente. La terapia CPAP le dará la oportunidad de disfrutar al fin del sueño profundo y apacible que no ha podido tener hasta ahora. Muchos pacientes sienten que gozan de más energía, un mejor juicio y una mayor capacidad de concentración durante el día. Con una terapia eficaz, logrará estar menos estresado e irritable y sentirse más identificado consigo mismo, con una actitud positiva y saludable ante la vida. De hecho, es probable que desee haber descubierto IntelliPAP antes.

## Recursos de utilidad

Al comenzar su terapia con IntelliPAP, recuerde que no está solo. Forma parte de una gran comunidad de usuarios de CPAP que crece cada día, y dispone de muchos recursos que darán respuesta a sus preguntas, calmarán su preocupaciones y le ayudarán a que su terapia sea lo más eficaz y cómoda posible.

### **American Academy of Sleep Medicine**

One Westbrook Corporate Ctr, Ste 920  
Westchester IL 60154 (EE.UU.)  
Teléfono: (708) 492-0390  
Fax: (708) 492-0943  
[www.aasmnet.org](http://www.aasmnet.org)

### **American College of Chest Physicians**

3300 Dundee Rd  
Northbrook, IL 60062-2348 (EE.UU.)  
Teléfono: (847) 498-1400 ó (800) 343-2227  
Fax: (847) 498-5460  
[www.chestnet.org](http://www.chestnet.org)

### **The Sleep Apnoea Trust**

12a Bakers Piece, Kingston Blount  
Oxon.  
OX39 4SW  
Tel: +44 845 60 60 685  
[www.sleepapnoea-trust.org](http://www.sleepapnoea-trust.org)

### **National Heart, Lung & Blood Institute**

Information Center  
P.O. Box 30105  
Bethesda, MD 20824-0105 (EE.UU.)  
Teléfono: (301) 592-8573  
Fax: (240) 629-3246  
[www.nhlbi.nih.gov](http://www.nhlbi.nih.gov)

### **American Academy of Neurology**

1080 Montreal Avenue  
St. Paul, Minnesota 55116 (EE.UU.)  
Teléfono: (651) 695-2717 ó (800) 879-1960  
Fax: (651) 695-2791  
[www.aan.com](http://www.aan.com)

### **American Sleep Apnea Association**

1424 K Street NW, Suite 302  
Washington, DC 20005 (EE.UU.)  
Teléfono: (202) 293-3650  
Fax: (202) 293-3656  
[www.sleepapnea.org](http://www.sleepapnea.org)

### **National Center on Sleep Disorder Research National Heart Lung & Blood Institute (NIH)**

6701 Rockledge Drive  
Bethesda, MD 20892 (EE.UU.)  
Teléfono: (301) 435-0199  
Fax: (301) 480-3451  
[www.nhlbi.nih.gov/sleep](http://www.nhlbi.nih.gov/sleep)

### **National Sleep Foundation**

1522 K Street, NW, Suite 500  
Washington, DC 20005 (EE.UU.)  
Teléfono: (202) 347-3471  
Fax: (202) 347-3472  
[www.sleepfoundation.org](http://www.sleepfoundation.org)

## COMPONENTES PRINCIPALES

### Desembalaje del contenido

Su sistema IntelliPAP de DeVilbiss incluye los siguientes elementos:

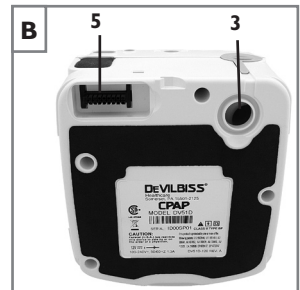
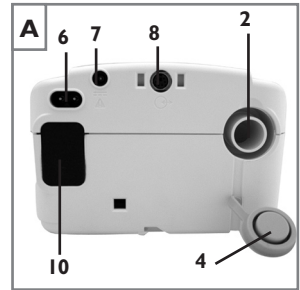
- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Dispositivo IntelliPAP | 5. Tubo de suministro de aire |
| 2. Filtro de repuesto     | 6. Manual del usuario         |
| 3. Cable de CA            | 7. DVD                        |
| 4. Funda para transporte  |                               |

Si falta alguno de estos elementos, póngase en contacto con su proveedor de servicios de atención sanitaria domiciliaria.

**NOTA:** Si ha recibido un humidificador con el sistema IntelliPAP, consulte la guía de instrucciones del humidificador para obtener información adicional.


### Dispositivo IntelliPAP de DeVilbiss (Figuras A and B)

1. Teclado/Pantalla LCD (Figura C)
2. Puerto de suministro de aire trasero
3. Puerto de suministro de aire inferior (para el humidificador opcional)
4. Clavija del puerto de suministro de aire
5. Conector de suministro eléctrico del calentador (para el humidificador opcional)
6. Conector de suministro eléctrico de CA
7. Conector de suministro eléctrico de CC
8. Puerto de datos
9. Cable (adecuado para su toma de electricidad de la pared) (no se muestra)
10. Orificio del filtro de entrada de aire



### Teclado (Figura C)

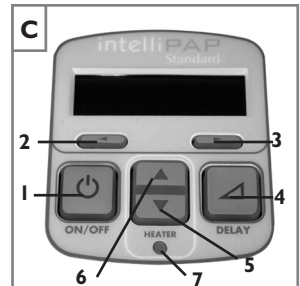1. Encendido/Apagado
2. Elemento anterior
3. Elemento siguiente
4. Delay
5. Disminuir valor
6. Aumentar valor
7. LED de encendido del calentador (para el humidificador opcional)



Para obtener más información sobre las mascarillas, el equipo y los accesorios de DeVilbiss, consulte con su proveedor de servicios de atención sanitaria domiciliaria.

## MONTAJE DEL SISTEMA SIN HUMIDIFICACIÓN

**NOTA:** Si su sistema incluye un humidificador, consulte las instrucciones sobre montaje y funcionamiento incluidas con el humidificador.

1. Localice el puerto de suministro de aire y el conector suplementario del calentador en la parte inferior del dispositivo IntelliPAP. Asegúrese de que todos los orificios tengan bien insertadas las cubiertas flexibles adecuadas.
2. Coloque el dispositivo IntelliPAP sobre una superficie estable, como una mesa o una mesita de noche. Si lo desea, también puede poner el dispositivo en el suelo junto a la cama, pero debe tener cuidado de no colocarlo en un lugar donde pueda pisarlo o darle una patada. Asegúrese de que nada bloquee la entrada de aire situada en la parte posterior, como cortinas o ropa de cama.

**NOTA:** Mientras esté en funcionamiento, no coloque nunca el sistema IntelliPAP en una superficie blanda como, por ejemplo, una cama o un sofá.

**PRECAUCIÓN:** Si se utiliza un humidificador, el sistema IntelliPAP debe estar siempre situado a una altura inferior a la de la mascarilla facial, para impedir que entre agua en la mascarilla del CPAP.

3. Inserte el cable en la parte posterior del dispositivo. Asegúrese de que el cable esté insertado completamente en el conector. Enchufe el otro extremo del cable a la toma de CA de la pared.
4. Conecte el tubo de suministro de aire a la salida de suministro de aire situada en la parte posterior del dispositivo.
5. Prepare la mascarilla (proporcionada por su proveedor de servicios de atención sanitaria domiciliaria).
6. Conecte el tubo de suministro de aire a la mascarilla.

**NOTA:** El tubo de suministro de aire incluido en el dispositivo está especialmente diseñado para no plegarse y permitir así un flujo de aire constante. Utilice únicamente tubos de 22 mm de diámetro con superficie interna lisa y antipliegues incluidos en su dispositivo o un tubo de suministro de aire recomendado por su proveedor de servicios de atención sanitaria domiciliaria.

## Teclado y Pantalla

Controles básicos del dispositivo IntelliPAP de DeVilbiss		
Nombre	Símbolo	Función
ON/OFF		El botón ON/OFF inicia y detiene el flujo de aire del dispositivo.
HEATER		Si su dispositivo IntelliPAP tiene conectado un calentador/humidificador, estos botones le permitirán ajustar la configuración del calentador. Aumente el valor si desea obtener más humedad y redúzcalo si desea menos humedad.
DELAY		El botón DELAY activa la función de retardo de comodidad y sólo funcionará si se ha habilitado esta función. Para aprender a configurar esta función, consulte la sección Uso de la función de retardo de comodidad en la página 33.

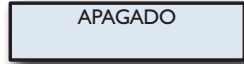
**NOTA:** Los demás botones del panel de control del dispositivo IntelliPAP se corresponden con controles avanzados de funciones específicas. Para obtener información detallada, consulte la sección 'Controles del menú de propiedades avanzadas' en la página 34.

# FUNCIONAMIENTO

## FUNCIONAMIENTO

### Inicio


Antes de empezar a utilizar el dispositivo IntelliPAP, asegúrese de que esté conectado a una toma de corriente 'activa'. Una vez enchufado el dispositivo, deberá aparecer la pantalla LCD tal como se muestra en la imagen.




Póngase la mascarilla de CPAP y pulse el botón ON/OFF del teclado para activar el flujo de aire O BIEN póngase la mascarilla de CPAP y respire varias veces hasta activar el flujo de aire automáticamente. La presión de la mascarilla alcanzará la presión configurada en aproximadamente 10 segundos.

**NOTA:** Si el dispositivo no se inicia automáticamente después de respirar 2 ó 3 veces, es posible que se haya desactivado esta función. Si la función de encendido/apagado automático está desactivada, deberá pulsar manualmente el botón ON/OFF para iniciar y detener el dispositivo.

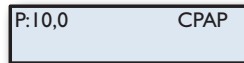La pantalla del teclado mostrará la presión actual de la mascarilla mientras esté utilizando el dispositivo. Debido a que ésta es la presión actual, la lectura de presión del dispositivo variará ligeramente al respirar. La pantalla deberá aparecer tal como se muestra en la imagen.



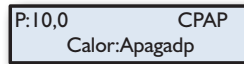Si el sistema IntelliPAP de DeVilbiss incluye un humidificador, el estado y los controles del calentador aparecerán como se muestra en la imagen.



**NOTA:** Si lo que aparece en la pantalla no se parece a lo que se muestra en las imágenes anteriores, consulte la sección "Mensajes del paciente" en la página 37 de este capítulo.

### Uso de la función de retardo de comodidad

El dispositivo IntelliPAP dispone de una función de retardo que le permitirá conciliar el sueño con facilidad. El flujo de aire comenzará con una presión baja y, durante los últimos minutos del período de retardo especificado, aumentará gradualmente la presión hasta alcanzar el nivel prescrito.

**NOTA:** Si la función de retardo de comodidad está activada, cada cierto tiempo aparecerá un mensaje parpadeante en la pantalla que indicará el tiempo de retardo que queda.

Podrá ajustar la duración del período de retardo mediante los controles avanzados del dispositivo. La duración del retardo se puede ajustar entre 0 y 45 minutos en incrementos de 5 minutos. Para obtener información detallada, consulte la página 35.



**NOTA:** Si no puede cambiar el tiempo de retardo, es posible que su proveedor haya bloqueado este parámetro. Para obtener información detallada, consulte la guía de menús del teclado en la página 35.

Pulse el botón DELAY para activar la función de retardo por comodidad. La presión del flujo de aire descenderá hasta alcanzar la presión de retardo cómoda prescrita.

Durante los últimos 10 minutos del período de retardo, la presión aumentará gradualmente hasta la presión prescrita para la terapia. Si no se ha dormido durante el período de retardo y desea repetirlo, pulse de nuevo el botón DELAY.




## Apagar el dispositivo

Para apagar el dispositivo, pulse el botón ON/OFF. Otra opción para apagar el dispositivo es simplemente quitarse la mascarilla. Transcurridos unos segundos, el dispositivo mostrará el mensaje “Quitar máscara. Comp. ac. másc.” Si no se vuelve a poner la mascarilla, el dispositivo se apagará automáticamente transcurridos aproximadamente 20 segundos. Pulse cualquier botón para borrar el mensaje de la pantalla.

**NOTA:** Si el dispositivo DeVilbiss IntelliPAP no se apaga automáticamente, es posible que se haya desactivado esa función. En este caso, deberá apagar el dispositivo manualmente.


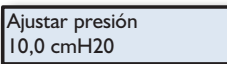
## CONTROLES DEL MENÚ DE PROPIEDADES AVANZADAS










Cuando el dispositivo esté encendido, pulse los botones “Siguiente” o “Anterior” del teclado para desplazarse por los elementos de la pantalla. Algunas son opcionales y otras dependen de las opciones que haya seleccionado su médico o su proveedor de servicios de atención sanitaria domiciliaria.

Nombre	Símbolo	Función
ELEMENTO ANTERIOR		Pulse este botón para ver la opción de menú anterior.
ELEMENTO SIGUIENTE		Pulse este botón para ver la opción de menú siguiente.
CAMBIAR VALOR		Estos botones permiten ajustar el valor que aparece en la pantalla.

Tenga en cuenta que los valores que aparecen son sólo ejemplos.




## Lista del menú de propiedades avanzadas

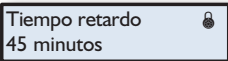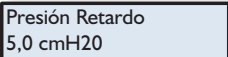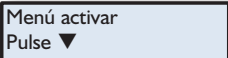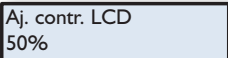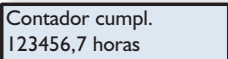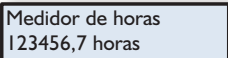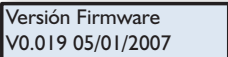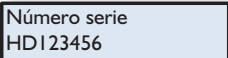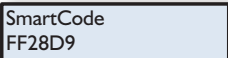Ejemplo de pantalla	Descripción
	Ésta es la pantalla predeterminada cuando el dispositivo IntelliPAP está encendido. En ella se muestra la configuración del calentador y la presión de la mascarilla real. La presión mostrada puede variar ligeramente al respirar. Si el sistema de calentador no está conectado, el valor de configuración de calor aparecerá en blanco.
	Esta pantalla muestra la configuración de prescripción que controla la presión de funcionamiento.

Ejemplo de pantalla	Descripción
	Configuración de tiempo de retardo seleccionable. Su proveedor ha programado el tiempo de retardo. Si aparece el símbolo desbloqueado, podrá ajustar este valor. Si aparece el símbolo bloqueado, únicamente su proveedor podrá ajustar este valor.
	Esta pantalla muestra la configuración de prescripción que controla la presión de funcionamiento durante el tiempo de retardo.
	Pulse la tecla hacia abajo para acceder al menú Activar. Para obtener información detallada sobre el menú Activar, consulte la siguiente sección.
	En esta pantalla se cambia el contraste de la pantalla LCD. Sólo será necesario ajustarlo si le resulta difícil ver la pantalla desde su ángulo de visión.
	El número total de horas (en incrementos de 1/10 hora) que el dispositivo IntelliPAP ha estado proporcionando terapia.
	El número total de horas (en incrementos de 1/10 hora) que el dispositivo IntelliPAP ha estado en funcionamiento.
	Muestra la versión del firmware instalada.
	Muestra el número de serie del dispositivo.
	Para registrar la información de adherencia se utiliza el sistema SmartCode™; la información de adherencia se codifica en una serie de letras y números e incluye un carácter especial para comprobación de errores y asegurar la exactitud a su médico.

## Lista del menú Activar

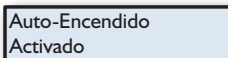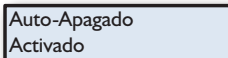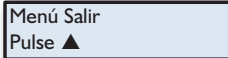
El menú Activar está disponible en todos los modos y es un submenú que permite controlar distintas funciones del dispositivo IntelliPAP. Para acceder a él, seleccione el menú de propiedades avanzadas y pulse el botón hacia abajo.

Ejemplo de pantalla	Descripción
	Esta opción controla la función Auto-Encendido, que inicia automáticamente el flujo de aire una vez que se respira una o dos veces con la mascarilla.
	Esta opción controla la función Auto-Apagado, que detiene automáticamente el flujo de aire una vez que se retira la mascarilla. En función de la mascarilla que se utilice, es posible que el dispositivo tarde hasta 30 segundos en apagarse.
	Pulse la tecla hacia arriba para salir del menú Activar.

## Diseño de menús para el paciente

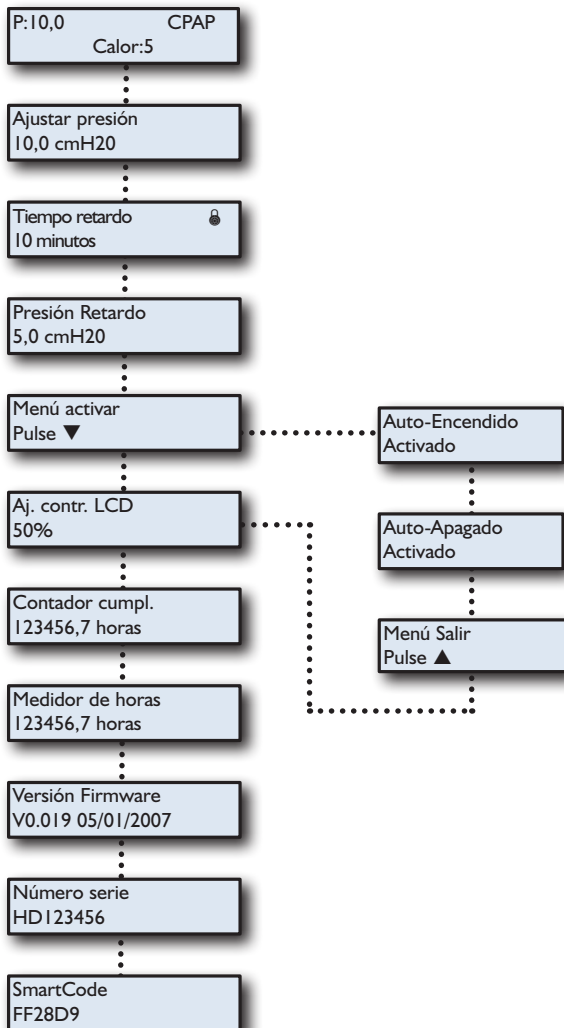La siguiente tabla muestra todas las pantallas a las que accederá en cada uno de los modos al pulsar los botones Siguiete o Anterior del teclado. Pulse el botón Abajo en la pantalla Menú activar para acceder a este submenú. A continuación, desplácese por las distintas opciones mediante los botones Siguiete y Anterior. Pulse el botón Arriba para volver al menú principal. Una vez que haya llegado a la pantalla final, pulse el botón Siguiete para volver a la primera pantalla.

### MENÚ - Modo CPAP



## MENSAJES DEL PACIENTE

El dispositivo IntelliPAP le advertirá de los posibles problemas que puedan requerir su intervención para dotar a su terapia de una mayor efectividad. Estos mensajes se muestran cuando el dispositivo está encendido, ya sea pulsando el botón ON/OFF o respirando con la mascarilla. Puede pulsar cualquier tecla o botón para borrar el mensaje de la pantalla, aunque el dispositivo IntelliPAP funcionará de la forma habitual aunque no se borre el mensaje.

Se pueden mostrar dos tipos de mensajes: Recordatorios y Notificaciones.

### Recordatorios

Los recordatorios le advierten que debe sustituir piezas de su sistema. Algunos componentes del sistema se desgastan con el tiempo y, si no se sustituyen, pueden afectar negativamente a su terapia. Si ve un mensaje en la pantalla que no aparezca a continuación, es posible que tenga conectado a su dispositivo el módulo opcional SmartLink™ de DeVilbiss, que muestra mensajes adicionales. Consulte la documentación proporcionada con el módulo SmartLink.

**Limpiar filtro:** El filtro se debe revisar cada 10 días para detectar signos de suciedad o desgaste y poder limpiarlo según sea necesario. Este mensaje le ayudará a recordar que debe revisarlo periódicamente.

### Notificaciones

Las notificaciones identifican posibles problemas con el dispositivo IntelliPAP que pueden requerir su intervención o la de su proveedor de servicios de atención sanitaria domiciliaria para mantener un nivel de efectividad elevado en la terapia. Si ve un mensaje en la pantalla que no aparezca a continuación, es posible que tenga conectado a su dispositivo el módulo opcional SmartLink de DeVilbiss, que muestra mensajes adicionales. Consulte la documentación proporcionada con el módulo SmartLink.

**NOTA:** Los valores que se muestran son sólo ejemplos de referencia.

**Func. Retardo xx min. faltan:** Mientras esté activo un retardo de comodidad, este mensaje parpadeará en la pantalla cada 5 segundos para informarle del tiempo restante de retardo.

**Quitar máscara:** Este mensaje aparece cuando se produce un problema de flujo de aire elevado. Por lo general, obtendrá un flujo de aire elevado si la mascarilla no está ajustada correctamente o si se ha retirado la mascarilla. Compruebe si hay una fuga alrededor del borde de la mascarilla y realice los ajustes necesarios conforme a las instrucciones del fabricante de la mascarilla.

Este mensaje se mostrará hasta que se haya corregido el problema de flujo de aire elevado. Si el problema de flujo de aire elevado persiste durante aproximadamente 20 segundos, el dispositivo se apagará automáticamente (si la función Auto-Apagado está activada).

**Fallo dis.:** Si se muestra un mensaje de error del dispositivo, consulte las instrucciones de la sección Solución de problemas.

## INFORMACIÓN DE INTELLIPAP EN CASO DE VIAJE

### Cambios internacionales de potencia eléctrica

Su dispositivo IntelliPAP de De'Longhi está equipado con un transformador universal. De esta forma, puede aceptar automáticamente voltajes de entrada de 100 a 240V~ 50/60Hz. No será necesario realizar ningún ajuste en el dispositivo si viaja a otro país en el que el voltaje de entrada sea distinto al voltaje de entrada de su país. Sólo tendrá que ponerse en contacto con su proveedor de servicios de atención sanitaria para obtener información sobre el tipo de enchufe correcto en la región a la que vaya a viajar (consulte el número de referencia correcto en la sección Accesorios/Piezas de repuesto).

### Altitud

Su dispositivo IntelliPAP compensa automáticamente los cambios de altitud entre el nivel del mar y 2750 m (9000 pies). No será necesario realizar ajustes relativos a cambios de altitud en el dispositivo.

## FUNCIONAMIENTO DE INTELLIPAP CON CC

### Alimentación de batería

El dispositivo IntelliPAP puede enchufarse a una toma de CC de 12V en una caravana, un barco u otro vehículo recreativo. La toma de corriente se puede utilizar con un cable accesorio de CC de 12V o con una batería independiente de CC de 12V. Puede solicitar cualquiera de estos elementos a su proveedor de servicios de atención sanitaria domiciliaria (consulte los números de referencia correctos en Accesorios/Piezas de repuesto). Para utilizar la batería independiente, es necesario disponer de ambos cables accesorios. La conexión con la batería independiente se realiza mediante unas pinzas que se conectan a los bornes de la batería.

**NOTA:** *El calentador del sistema de humidificación de IntelliPAP no puede funcionar directamente a través de una toma de CC de 12V. En caso necesario, puede utilizar el sistema de humidificación "passover", que aún se encuentra disponible. También puede convertir la señal de CC en CA mediante un inversor de corriente que suministre la CA al sistema en lugar de conectar directamente la toma de CC de 12V a IntelliPAP. De esta forma, funcionará el calentador. El inversor deberá tener una potencia de salida de al menos 200 vatios @ 110V~ / 400 vatios @ 220V~.*

**NOTA:** *Si se encuentran disponibles ambas tomas de corriente, el dispositivo IntelliPAP alternará automáticamente entre la de toma de CA y la toma de CC de 12V. Si la unidad está conectada tanto a la toma de CA como a la de CC de 12V, funcionará con la toma de CA cuando ésta se encuentre disponible y pasará automáticamente a la de CC de 12V en caso de que se pierda la anterior. Cuando se restaure la CA, la unidad volverá a utilizar la toma de CA. No será necesario que realice ningún tipo de restauración ni ajuste de parámetros cuando se produzcan los cambios de tomas de corriente, pero recuerde que el calentador no funcionará con CC de 12V.*

## OXÍGENO SUPLEMENTARIO

A veces se prescribe el uso de oxígeno suplementario, además de CPAP, para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño. Si su médico le indica que utilice oxígeno para la terapia del sueño, podrá añadirlo de dos formas:

1. Solicite el adaptador de oxígeno opcional (número de referencia 7353D-601) a su proveedor de servicios de atención sanitaria domiciliaria y conéctelo al puerto de salida del dispositivo IntelliPAP. Conecte un extremo del tubo de suministro de aire al extremo abierto del adaptador y el otro extremo del tubo a la mascarilla.
2. Si la mascarilla dispone de un puerto de oxígeno, es posible que su médico le pida que aplique el oxígeno directamente a la mascarilla.



### ADVERTENCIA-USO DE OXÍGENO

**El oxígeno mantiene la combustión. Para evitar posibles daños físicos, no fume mientras esté utilizando este dispositivo con oxígeno suplementario. No utilice este dispositivo cerca de objetos calientes, sustancias volátiles ni llamas.**

**Encienda siempre el dispositivo IntelliPAP antes de conectar la fuente de suministro de oxígeno. Desconecte la fuente de suministro de oxígeno antes de apagar el dispositivo IntelliPAP.**

**Este dispositivo no puede utilizarse en presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire, oxígeno u óxido nitroso.**

**A una velocidad fija de flujo de oxígeno suplementario, la concentración de oxígeno inhalado variará dependiendo del parámetro de presión, del ritmo de respiración del paciente, del tipo de mascarilla y del porcentaje de fuga de la misma. Esta advertencia se aplica a la mayoría de los dispositivos CPAP.**

**Si no se está utilizando el dispositivo IntelliPAP, no permita nunca que la fuente de suministro de oxígeno esté en funcionamiento mientras se encuentre conectada al dispositivo. Si no se está utilizando el dispositivo IntelliPAP, cierre el suministro de oxígeno.**

**PRECAUCIÓN:** *El oxígeno es un gas que se prescribe por orden de un médico y se puede administrar únicamente bajo la supervisión de éste.*

**PRECAUCIÓN:** *El flujo del oxígeno debe ser especificado por el médico.*

## ACCESORIOS/PIEZAS DE REPUESTO

### Piezas de repuesto

Filtro de entrada de aire (4/paquete).....	DV51D-602
Filtro de partículas finas opcional (4/paquete) .....	DV51D-603
Tubo de suministro de aire (6 pies (1,8 m) .....	7351D-616
Conector de la fuente de suministro de aire .....	DV51D-602
Cubierta de conexión del calentador .....	DV51D-605
Adaptador de oxígeno.....	7353D-601
Funda para transporte .....	DV51D-610

### Componentes eléctricos

#### Cables de CA

EE. UU.....	DV51D-606
Europa, excepto Reino Unido .....	DV51D-607
Reino Unido .....	DV51D-608
Australia .....	DV51D-609
Cable de CC .....	DV51D-619
Adaptador de pinza de batería de CC .....	DV51D-696

### Mascarillas recomendadas para el dispositivo DeVilbiss IntelliPAP:

Mascarilla FlexSet® de DeVilbiss.....	9354D
Mascarilla superficial FlexSet® de DeVilbiss.....	9354S
Mascarilla de gel FlexSet® de DeVilbiss .....	9354G
Mascarilla superficial de gel FlexSet® de DeVilbiss .....	9354GS
Mascarilla FlexAire® de DeVilbiss .....	9353D
Mascarilla superficial FlexAire® de DeVilbiss .....	9353S
Mascarilla Serenity® de DeVilbiss.....	9352D
Mascarilla superficial Serenity® de DeVilbiss .....	9352S
Mascarilla de gel Serenity® de DeVilbiss.....	9352G
Mascarilla de gel Serenity® de DeVilbiss.....	9352GS

### Humidificador con calentador opcional

Humidificador con calentador DeVilbiss (soporte y cámara) .....	DV5HH
---	-------

## MANTENIMIENTO DE INTELLIPAP



### PELIGRO

**PELIGRO-Riesgo de descarga eléctrica:** No intente abrir ni retirar la carcasa del dispositivo; no contiene componentes que el usuario pueda reparar o sustituir. Si necesita reparar el dispositivo, póngase en contacto con su proveedor de servicios de atención sanitaria domiciliaria para obtener instrucciones relativas al servicio de mantenimiento del dispositivo. Si abre el dispositivo o intenta repararlo, la garantía se anulará.



### ADVERTENCIA

**ADVERTENCIA:** Si el dispositivo parece no funcionar con normalidad o empieza a emitir sonidos inusuales, deje de utilizarlo y póngase en contacto con su proveedor de servicios de atención sanitaria domiciliaria para obtener la ayuda necesaria.

**ADVERTENCIA:** Si el dispositivo ha sufrido una caída, compruebe si funciona. Si no funciona o tiene dañada la carcasa, deje de utilizarlo y póngase en contacto con su proveedor.

**ADVERTENCIA:** Si el dispositivo parece no funcionar correctamente, consulte la sección Solución de problemas para obtener las instrucciones necesarias.

**Presión correcta:** El dispositivo IntelliPAP está diseñado para ofrecer una presión correcta de fábrica sin necesidad de calibración adicional. El dispositivo no necesita ningún servicio de mantenimiento rutinario durante un período de uso de 2 años, siempre que se utilice de acuerdo con las indicaciones del fabricante. El dispositivo se debe inspeccionar transcurridos 2 años.

**NOTA:** *En algunos países, esta clase de dispositivos médicos se deben calibrar y revisar periódicamente. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios de atención sanitaria domiciliaria.*

**Filtro de entrada de aire estándar:** Compruebe el filtro cada 10 días y límpielo si es necesario. El filtro debe reemplazarse cada 6 meses (o antes si está dañado). El filtro estándar está diseñado para filtrar partículas de tamaño superior a 3 micras. El filtro estándar DEBE estar colocado en el dispositivo IntelliPAP cuando éste se encuentre en funcionamiento.

**Filtro de partículas finas opcional:** Compruebe el filtro cada 10 días y reemplácelo si está sucio o dañado. Aunque no llegue a ensuciarse ni recibir ningún daño, el filtro se debe cambiar cada 30 días. El filtro de partículas finas opcional está diseñado para filtrar partículas de tamaño superior o igual a 0,3 micras.

**Mantenimiento del filtro:** Consulte la sección Limpieza para obtener instrucciones al respecto.

## LIMPIEZA DE INTELLIPAP



### ADVERTENCIA

**Para evitar descargas eléctricas, desenchufe siempre el cable de la toma de corriente de la pared antes de limpiar el dispositivo.**

**PRECAUCIÓN:** *No enjuague nunca el dispositivo ni lo sumerja en agua. Nunca permita que entre ni haya líquido cerca de los puertos, de los interruptores o del filtro de aire, ya que podrían producirse daños en el equipo. Si ocurre esto, no utilice el dispositivo. Póngase en contacto con el proveedor de servicios de atención sanitaria domiciliaria para obtener asistencia técnica.*

### Caja del dispositivo

1. Desenchufe el dispositivo IntelliPAP de la toma de corriente. Limpie la carcasa con un paño suave y limpio cada pocos días para que no se acumule en ella el polvo.
2. Deje secar el dispositivo completamente antes de volver a enchufarlo.

### Filtros

#### Filtro de entrada de aire (estándar)

1. El filtro de entrada de aire se debe inspeccionar cada 10 días y limpiar si es necesario. El filtro se encuentra en la parte posterior del dispositivo.

**PRECAUCIÓN:** *Es importante que se realice una función de filtrado adecuada para que funcione el dispositivo y para protegerlo de los daños.*

2. Para efectuar la limpieza, retire el filtro de espuma exterior sucio del marco.
3. Lave el filtro con una solución de agua tibia y detergente para lavavajillas y enjuague con agua. Deje que el filtro se seque por completo. Si el filtro (nº de referencia DV51D-602) estuviera dañado, comuníquese a su proveedor de servicios de atención sanitaria domiciliaria y pídale que lo sustituyan.
4. Asegúrese de que el filtro esté completamente seco antes de instalarlo y utilizarlo.

#### Filtro de partículas finas (opcional)

1. Si dispone de un filtro de partículas finas opcional (nº de referencia DV51D-603), inspecciónelo y sustitúyalo si está sucio o dañado. No lo lave.
2. Instale el filtro de partículas finas situado detrás del filtro estándar.

**NOTA:** *Si el filtro de partículas finas no se instala según las indicaciones su duración se verá reducida y será necesario sustituirlo con más frecuencia.*

### Tubos

Los tubos de suministro de aire se deben limpiar a diario. Retire los tubos del dispositivo y la mascarilla. Limpie el interior de los tubos con agua y un detergente suave. Enjuague los tubos y deje que se sequen al aire.

### Mascarilla y tiras de sujeción

Limpie la mascarilla y las tiras de sujeción según las instrucciones del fabricante.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



### PELIGRO

**Peligro de descargas eléctricas: No extraiga la caja del dispositivo; no hay componentes internos cuyo mantenimiento o reparación pueda efectuar el usuario. La caja sólo la deberá extraer un proveedor cualificado de DeVilbiss.**

Si tiene problemas con el funcionamiento del dispositivo IntelliPAP de DeVilbiss, en la tabla siguiente encontrará una lista de problemas y sus posibles causas y soluciones. Si no puede resolver el problema siguiendo las instrucciones que se especifican a continuación, póngase en contacto con su proveedor de servicios de atención sanitaria domiciliaria.

Problema	Causa probable	Solución
No aparece nada en la pantalla.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El dispositivo no está enchufado o el cable no está completamente insertado.</li> <li>2. No hay corriente.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1a. Compruebe que el cable de corriente esté conectado correctamente al dispositivo IntelliPAP y a la toma de corriente.</li> <li>1b. Si está utilizando una toma de corriente de CC, asegúrese de que las conexiones del cable se hayan insertado correctamente. Compruebe que la batería esté cargada.</li> <li>2. Localice una toma de corriente activa adecuada.</li> </ol>
El dispositivo IntelliPAP no se enciende al respirar en la máscara.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La función de encendido automático está desactivada.</li> <li>2. La corriente eléctrica no llega al dispositivo.</li> <li>3. La respiración no es lo bastante profunda para activar la función de encendido automático.</li> <li>4. Está utilizando una mascarilla facial completa con una válvula antiasfixia.</li> <li>5. El conector de la toma de suministro de aire falta o no se ha insertado completamente.</li> <li>6. La cámara del humidificador falta o no está completamente encajada en el soporte.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Encienda y apague el dispositivo con el botón ON/OFF.</li> <li>2. Compruebe que el cable de corriente esté conectado correctamente al dispositivo y a la toma de corriente.</li> <li>3. Inspire y espire profundamente para encender el dispositivo IntelliPAP.</li> <li>4. Es posible que la función de encendido no funcione porque el aire espirado se escape a través de la válvula abierta. Encienda y apague el dispositivo con el botón ON/OFF.</li> <li>5. Compruebe que el conector de la toma de suministro de aire esté completamente insertado en la unidad.</li> <li>6. Deslice completamente la cámara del humidificador en la ranura. Compruebe que la palanca de enganche esté bien encajada.</li> </ol>

Problema	Causa probable	Solución
El flujo de aire se ha interrumpido de forma inesperada durante el uso.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La función de Auto-Apagado ha detectado un gran flujo de aire porque la mascarilla no se ajusta bien.</li> <li>2. Durante el uso, usted abre la boca y comienza a respirar por ella.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe que la mascarilla se ajuste bien, y ajuste adecuadamente las tiras de sujeción y la mascarilla.</li> <li>2. Solicite una correa para la mandíbula a su proveedor de servicios de atención sanitaria domiciliaria, que le ayudará a evitar respirar por la boca.</li> </ol> <p>Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, desactive la función de Auto-Apagado en las opciones del menú de propiedades avanzadas.</p>
La pantalla indica un error del dispositivo.	Se ha producido un error en el dispositivo y es necesario repararlo.	Póngase en contacto con el proveedor de servicios de atención sanitaria domiciliaria para obtener asistencia técnica.
Han reaparecido síntomas de AOS.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El filtro de aire puede estar obstruido.</li> <li>2. El estado de la apnea del sueño ha cambiado.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Limpie o sustituya el filtro de aire y coloque el dispositivo lejos de cortinas y otras superficies con polvo.</li> <li>2. Póngase en contacto con su médico.</li> </ol>
La piel se le irrita en la superficie de contacto de la mascarilla.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las tiras de sujeción están demasiado apretadas o mal ajustadas.</li> <li>2. Es posible que la forma o el tamaño de la máscara no sean los más adecuados.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Afloje las tiras de sujeción para reducir la presión de contacto sobre el rostro.</li> <li>2. Póngase en contacto con su médico o proveedor de servicios de atención sanitaria domiciliaria.</li> </ol>
Sequedad de nariz o garganta.	Humedad inadecuada.	Aumente el valor de configuración del calentador en el humidificador.
Se está acumulando condensación de agua en la manguera, lo que produce un sonido de gorgoteo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. El valor de la humidificación es demasiado alto.</li> <li>2. La temperatura ambiente fluctúa de niveles altos a niveles más bajos a lo largo de la noche.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Añada un humidificador con calentador De'Vilbiss DV5.</li> <li>2. Reduzca el valor del calentador del humidificador y/o aumente la temperatura de la habitación.</li> </ol>

Problema	Causa probable	Solución
El aire procedente del generador de flujo parece demasiado caliente.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los filtros de aire están sucios.</li> <li>2. El puerto de entrada de aire está bloqueado.</li> <li>3. La temperatura ambiente es demasiado alta.</li> <li>4. El dispositivo IntelliPAP se encuentra cerca de una fuente de calor.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consulte la sección de limpieza para obtener información sobre el mantenimiento del filtro.</li> <li>2. Desbloquee la entrada de aire.</li> <li>3. Reduzca la temperatura ambiente.</li> <li>4. Coloque el dispositivo lejos de la fuente de calor de modo que el aire que penetra en el dispositivo se encuentre a temperatura ambiente.</li> </ol> <p>Si el problema persiste, póngase en contacto con su proveedor de servicios de atención sanitaria domiciliaria.</p>
Dolor nasal, de los senos nasales o de los oídos, con posible congestión nasal.	Es posible que tenga una reacción a la presión del flujo de aire.	No siga utilizando el dispositivo y póngase en contacto con su médico.

## ESPECIFICACIONES

Dimensiones..... 10,7 cm (4,2") de alto x 16,5 cm (6,5") de ancho x 17,5 cm (6,9") de largo

Peso..... 1,22 kg. (2,7 lbs.)

Requisitos eléctricos..... 100-240V~, 50/60 Hz

Consumo máximo de energía..... Máximo de 65 vatios de una toma de CA (sólo generador de flujo)

Rango de presión..... 3-20 cmH<sub>2</sub>O

Rango de temperatura de funcionamiento..... Entre 5 °C (41 °F) y 40 °C (104 °F)

Rango de humedad de funcionamiento..... Entre 0% y 95% de HR sin condensación

Condiciones atmosféricas de funcionamiento..... Desde el nivel del mar hasta una altura de 2.743 m (9.000 pies)

Rango de temperatura para almacenamiento y transporte ..... Entre -40 °C (-104 °F) y +70 °C y (+158 °F)

Rango de humedad para transporte y almacenamiento..... Entre 0% y 95% de HR sin condensación

Presión máxima limitada..... 20 cmH<sub>2</sub>O bajo condiciones normales de uso

Nivel de sonido (comprobación según ISO 17510)..... 26 dBA

### Especificaciones de filtrado

Filtro estándar > partículas de 3,0 micras

Filtro opcional de partículas finas > partículas de 0,3 micras

**Cantidades de flujo máximo**

83 l/m ..... a 6,5 cmH<sub>2</sub>O (1/3 de presión máx.)  
 134 l/m ..... a 13 cmH<sub>2</sub>O (2/3 de presión máx.)  
 163 l/m ..... a 20 cmH<sub>2</sub>O (presión máx.)  
 Precisión de presión .....  $\pm 1,0$  cmH<sub>2</sub>O

**Variabilidad de la presión**

**(en cmH<sub>2</sub>O de pico a pico con un volumen tidal de 500 mL, perfil de onda sinusoidal)**

Respiraciones por minuto	10	15	20
a 6,5 cmH <sub>2</sub> O	0,5	0,6	0,9
a 13 cmH <sub>2</sub> O	1,0	1,0	1,2
a 20 cmH <sub>2</sub> O	1,0	1,0	1,2

Garantía ..... Limitada a tres años  
 Clasificación del equipo respecto a protección contra descargas eléctricas ..... Clase II  
 Grado de protección contra descargas eléctricas ..... Pieza aplicada de tipo BF  
 Grado de protección contra la entrada de líquidos ..... IPX1  
 Este equipo no resulta adecuado para su uso en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nitroso.  
 Modo de funcionamiento ..... Continuo

**Especificaciones clínicas para salidas digitales**

Presión ..... Entre 0 y 25,5 cmH<sub>2</sub>O  $\pm 0,5$

## GARANTÍA

Todos los dispositivos DeVilbiss IntelliPAP están garantizados frente a cualquier defecto de mano de obra o de material por un período de tres años a partir de la fecha de compra. Cualquier pieza defectuosa se reparará o sustituirá conforme a la decisión de DeVilbiss si el dispositivo no ha sido forzado ni se ha utilizado de forma inadecuada durante dicho período. Asegúrese de que el funcionamiento incorrecto del dispositivo no se deba a una limpieza inadecuada ni al incumplimiento de las instrucciones. Si necesita reparar el dispositivo, póngase en contacto con el proveedor de DeVilbiss o con el departamento de atención al cliente de DeVilbiss y solicite instrucciones:

EE.UU. 800-338-1988, 814-443-4881

Canadá 800-263-3390

Europa 44-138-444-6688.

**NOTA:** *Esta garantía no cubre el préstamo de otro dispositivo, ni la compensación de los costes en que se incurra por el alquiler de otro dispositivo mientras el suyo se esté reparando, ni los costes de mano de obra derivados de la reparación o la sustitución de las piezas defectuosas.*

NO EXISTE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA Y, EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY LO PERMITA, TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS QUEDAN EXCLUIDAS. ÉSTA ES LA ÚNICA GARANTÍA EXISTENTE Y LA ÚNICA RESPONSABILIDAD QUE SE ASUMIRÁ POR DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES. TODAS LAS GARANTÍAS QUEDAN EXCLUIDAS EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY LO PERMITA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA IMPLÍCITA, NI LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE NO SE LE APLIQUE LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN ANTERIOR.

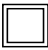









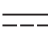






Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Puede disponer también de otros derechos según la legislación local.



## TABLE DES MATIÈRES

Explication des symboles.....	50
Mises en garde importantes.....	50
Introduction.....	51
Usage préconisé/Indications thérapeutiques.....	51
Contre-indications.....	51
Qu'est-ce que l'apnée obstructive du sommeil (AOS) ?.....	51
Mode de fonctionnement d'un traitement par CPAP/PPC.....	52
Acclimatation au traitement.....	53
Avantages du traitement.....	53
Ressources importantes.....	54
Caractéristiques principales.....	55
Déballage de l'appareil.....	55
Appareil IntelliPAP.....	55
Clavier.....	55
Assemblage du système.....	56
Clavier et Affichage.....	56
Fonctionnement.....	57
Démarrage.....	57
Utilisation de la fonction de délai confort (« Comfort Delay »).....	57
Arrêt.....	58
Utilisation du menu détaillé.....	58
Liste du menu détaillé.....	58
Liste du menu d'activation des fonctions.....	60
Menu patient en mode CPAP/PPC.....	61
Messages pour le Patient.....	62
Rappels.....	62
Notifications.....	62
Informations sur l'utilisation de l'appareil IntelliPAP en voyage.....	63
Mode de fonctionnement de l'appareil IntelliPAP en courant continu.....	63
Puissance nominale de la batterie.....	63
Oxygène d'appoint.....	64
Accessoires et pièces de rechange.....	65
Entretien.....	66
Nettoyage.....	67
Dépannage.....	68
Caractéristiques techniques.....	70
Garantie.....	71

## EXPLICATION DES SYMBOLES

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Protection électrique de classe II double isolation   |  | Équipement – pièce appliquée de type BF                          |
|  | Données d'entrée/Données de sortie  |  | Mode veille – Mise sous tension ou hors tension du ventilateur   |
|  | Option suivante sur écran LCD   |  | Permet d'augmenter la valeur de réglage affichée sur l'écran LCD |
|  | Option précédente sur écran LCD   |  | Permet de diminuer la valeur de réglage affichée sur l'écran LCD |
|  | Attention – Lisez attentivement les documents   |  | Joints relatifs à l'humidification chauffante                    |
|  | Tension d'entrée CC. : 12 VCC, la borne positive se trouve au centre  |  | Tension/fréquence d'entrée (isolée) : 100 – 240 V c.a., 50/60 Hz |
|  | Bloqué  |  | Débloqué   |
|  | IPX1 Norme IPX1 - Appareil protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau  |   |  |
|  | Fonction Délai-Démarre le cycle Délai, si prescrit  |   |  |
|  | Cet appareil contient du matériel électrique et/ou électronique qui doit être recyclé conformément à la Directive 2002/96/CE – Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). |   |  |

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

**Respectez toujours des précautions de base lorsque vous utilisez un appareil électrique. Veuillez lire toutes les instructions attentivement avant d'utiliser cet appareil. Ce manuel contient des termes qui ont pour but d'attirer votre attention sur des informations importantes.**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| <b>DANGER</b>        | Consignes de sécurité extrêmement importantes concernant un danger entraînant des blessures graves, voire mortelles. |
| <b>AVERTISSEMENT</b> | Consignes de sécurité importantes concernant un danger pouvant entraîner des blessures graves.                       |
| <b>ATTENTION</b>     | Informations visant à éviter l'endommagement de l'appareil.  |
| <b>REMARQUE</b>      | Informations auxquelles il convient de prêter une attention particulière.  |

**VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS  
ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER CET APPAREIL  
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**



## DANGER

**Danger de décharge électrique – N'utilisez pas cet appareil en vous baignant.**

**Danger de décharge électrique – N'immergez jamais cet appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.**

**Danger de décharge électrique – N'essayez jamais d'ouvrir ou de retirer le boîtier. Cet appareil ne contient aucun composant interne réparable par l'utilisateur. Contactez votre prestataire de soins à domicile pour toute réparation de l'appareil. Toute ouverture ou altération de l'appareil annule la garantie.**



## AVERTISSEMENT

**Utilisez toujours l'appareil IntelliPAP™ de DeVilbiss uniquement avec les masques recommandés par DeVilbiss, votre médecin ou votre respirothérapeute.**

**Afin d'éviter la réinhalation de l'air expiré, ne portez le masque CPAP/PPC que si l'appareil est sous tension et délivre de l'air. N'obstruez jamais les orifices de ventilation du masque. Lorsque l'appareil est sous tension et délivre de l'air frais, l'air expiré est expulsé par les orifices de ventilation du masque. Toutefois, si l'appareil est hors tension, une réinhalation de l'air expiré peut se produire. Si la réinhalation de l'air expiré dure plus que quelques minutes, elle peut dans certains cas entraîner une asphyxie. Cet avertissement s'applique à la plupart des modèles d'appareils CPAP/PPC.**

**L'appareil IntelliPAP de DeVilbiss n'est pas un appareil de survie. Son fonctionnement peut être interrompu en cas de panne ou de coupure de l'alimentation. Son usage est préconisé pour des personnes respirant spontanément et pesant plus de 30 kg (66 lb).**

**Pour éviter toute décharge électrique, débranchez toujours l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer.**

**N'utilisez que les accessoires recommandés par DeVilbiss.**

**ATTENTION**—*Le connecteur rond du port de transmission des données situé à l'arrière de l'appareil IntelliPAP est utilisé pour fixer les accessoires. Le connecteur ne doit être utilisé qu'avec les accessoires agréés par DeVilbiss. N'essayez jamais de fixer un autre appareil sur ce connecteur, cela pourrait endommager l'appareil CPAP/PPC ou ses accessoires.*

**ATTENTION**—*Ne rincez jamais l'appareil et ne le mettez jamais dans l'eau. Ne laissez jamais de liquide pénétrer dans l'appareil ou près des ports d'entrée-sortie, interrupteurs ou filtre à air, car cela endommagerait l'appareil. Si de l'eau pénètre dans l'appareil, arrêtez-le et débranchez-le. Laissez sécher l'appareil complètement avant toute utilisation.*

**ATTENTION**—Placez toujours l'appareil IntelliPAP dans un endroit où il ne peut pas être renversé et où le câble d'alimentation ne risque pas de faire trébucher qui que ce soit.

**ATTENTION**—Le système d'humidification chaude des modèles de séries DV5 de DeVilbiss est le seul système recommandé pour une utilisation avec l'appareil IntelliPAP. L'utilisation de tout autre système d'humidification peut empêcher l'appareil de détecter le ronflement et causer un niveau de pression inadéquat dans le masque.

**ATTENTION**—L'oxygène est un gaz fourni sur ordonnance seulement et qui ne doit être administré que sous la surveillance d'un médecin.

## INTRODUCTION

### Usage préconisé/Indications thérapeutiques

Le modèle DV5 Series de l'appareil IntelliPAP™ de DeVilbiss® est préconisé pour un traitement des patients adultes (pesant au moins 30 kg et plus) souffrant d'apnée obstructive du sommeil.

### Contre-indications

N'utilisez pas l'appareil IntelliPAP si vos voies aériennes supérieures sont court-circuitées.

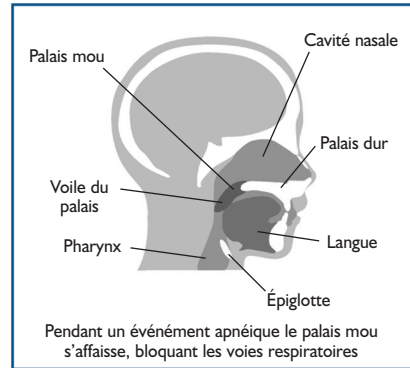
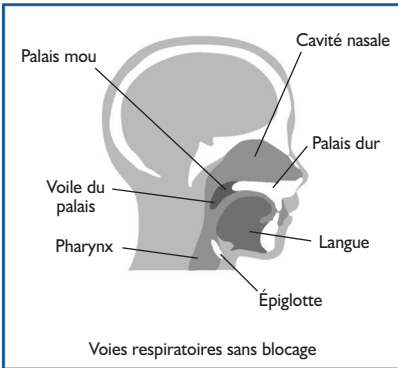
**REMARQUE**—Une sécheresse nasale, buccale ou de la gorge sont des effets secondaires fréquents lors d'un traitement par ventilation spontanée en pression positive continue. Ces effets secondaires se produisent particulièrement dans les climats secs et durant l'hiver lorsque le niveau d'humidité de l'air ambiant est généralement inférieur à la normale. L'appareil IntelliPAP peut être utilisé avec un système d'humidification en option afin de pallier ces effets secondaires.

### Qu'est-ce que l'apnée obstructive du sommeil (AOS) ?

L'apnée obstructive du sommeil (AOS) est un trouble respiratoire qui touche plus de 22 millions d'Américains – environ 4 % des hommes d'âge moyen et 2 % des femmes d'âge moyen.

Plusieurs facteurs anatomiques peuvent contribuer individuellement ou en combinaison à l'AOS, notamment la taille des amygdales, la forme du nez ou le rétrécissement des voies aériennes supérieures. Pendant le sommeil, se produit un relâchement musculaire qui entraîne un affaissement et un blocage des voies respiratoires. Ce relâchement provoque la vibration des tissus de l'arrière-gorge et déclenche le ronflement. Lorsque l'affaissement est complet, se produit un blocage des voies respiratoires et des pauses respiratoires. (apnée vient du mot grec « apnea » qui signifie « cesser de respirer ».)

Les pauses respiratoires se reproduisent pendant la nuit et peuvent durer de quelques secondes à plus d'une minute. Lorsque le taux d'oxygène dans le sang chute à des niveaux dangereux, le système nerveux central déclenche des réveils en sursaut, empêchant le maintien du sommeil profond et réparateur dont notre corps a besoin. Ces événements nocturnes entraînent fréquemment une fatigue diurne, ainsi qu'une tension et une irritabilité – pouvant affecter les prises de décision d'une personne et créer des conditions potentiellement dangereuses, notamment en conduisant ou en travaillant.



Les répercussions de l'apnée obstructive du sommeil sur la santé sont également importantes. L'AOS prive le cœur, le cerveau, et les organes vitaux d'une oxygénation continue. À la longue, cette privation d'oxygène est susceptible d'avoir des répercussions graves sur la santé, qui se manifestent par exemple par des troubles de la mémoire, l'impuissance, l'hypertension, des maladies coronariennes et des accidents vasculaires cérébraux et des infarctus. Des recherches récentes indiquent que l'AOS comporte les mêmes facteurs de risques de cardiopathies que les risques issus de la consommation de tabac, d'alcool et d'un taux de cholestérol élevé. Il est estimé que 38 000 personnes meurent chaque année des effets secondaires provoqués de l'AOS.

L'AOS est un trouble grave qui doit être surveillé et traité.

## Mode de fonctionnement d'un traitement par ventilation spontanée en pression positive continue (CPAP/PPC)

Il existe plusieurs traitements de l'AOS, notamment des traitements chirurgicaux, et le traitement par ventilation spontanée en pression positive continue (CPAP/PPC). Le traitement par CPAP/PPC s'avère très efficace chez la plupart des patients. PPC (de l'anglais CPAP) est l'abréviation de 'pression positive continue'. L'appareil IntelliPAP de DeVilbiss est conçu précisément pour administrer une pression positive continue dans les voies aériennes supérieures en agissant comme une « attelle pneumatique » qui sert à maintenir les voies respiratoires ouvertes pendant le sommeil.

Le traitement réduit ou diminue tout blocage, et induit le sommeil profond, réparateur et ininterrompu dont nous avons besoin. Le traitement répond avant tout aux besoins de repos et d'oxygénation du corps, procurant ainsi un sommeil profond et ininterrompu, et réduisant les risques graves liés à l'AOS. L'appareil IntelliPAP est conçu pour administrer un traitement silencieux et confortable qui permet à l'utilisateur de dormir toute la nuit sans interruption.

## Acclimatation au traitement

Tout produit/traitement nouveau – notamment le traitement par CPAP/PPC – demande une certaine période d'acclimatation. Le port d'un masque buccal ou nasal (parfois combiné) peut susciter au début du traitement une sensation de claustrophobie ou d'anxiété. L'air délivré par l'appareil IntelliPAP peut susciter une certaine gêne et préoccuper l'utilisateur. Ces sensations sont de courte durée – au début d'un traitement à long terme chaque utilisateur d'un appareil de traitement par CPAP/PPC éprouve de telles sensations, finit par les surmonter, puis par apprécier pleinement les avantages d'un tel traitement.

Suivez les étapes indiquées ci-dessous pour vous habituer progressivement au traitement et surmonter toute anxiété.

1. Fixez le masque sur l'appareil de traitement par CPAP/PPC et mettez l'appareil en marche. Prenez le temps de vous habituer à respirer en portant le masque pendant une heure alors que vous regardez la télévision, lisez ou exercez une activité en position assise.
2. Si vous faites la sieste, profitez-en pour utiliser l'appareil de traitement par CPAP/PPC.
3. Commencez par utiliser l'appareil de traitement par CPAP/PPC au moins pendant les 3 ou 4 premières heures de sommeil.
4. Utilisez l'appareil de traitement par CPAP/PPC pendant toute une nuit.

Suivez chacune des ces étapes dans l'ordre; lorsque vous ne ressentez plus d'anxiété lors d'une étape, passez aussitôt à l'étape suivante.

## Avantages du traitement

En utilisant l'appareil IntelliPAP de DeVilbiss pour votre traitement, vous êtes sur la bonne voie pour améliorer votre santé et la qualité de votre vie, bénéficier d'un sommeil ininterrompu et éliminer les risques liés à l'AOS. Lorsque vous vous serez habitué(e) au traitement par CPAP/PPC, vous serez sans doute surpris(e) par le bien-être physique et émotionnel que vous ressentirez. Le traitement par CPAP/PPC vous permettra enfin de faire l'expérience du sommeil profond et réparateur qui vous manquait. De nombreux patients notent une amélioration de leur vitalité et de leur concentration quotidienne. Avec un traitement efficace, vous serez moins tendu(e), moins irrité(e) et retrouverez une perspective optimiste et saine. En fait, vous regretterez probablement de ne pas avoir pu bénéficier de l'appareil IntelliPAP plus tôt !

## Ressources utiles

Alors que vous commencez à utiliser votre appareil de traitement IntelliPAP, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul(e) ! Vous appartenez à un réseau important et en expansion d'utilisateurs d'appareils de traitement par CPAP/PPC. De nombreuses ressources sont à votre disposition pour répondre à toute question et tout problème, et vous permettre de bénéficier d'un traitement aussi efficace et facile que possible.

### **American Academy of Sleep Medicine**

One Westbrook Corporate Ctr, Ste 920  
Westchester IL 60154  
Téléphone : (708) 492-0390  
Fax : (708) 492-0943  
[www.aasmnet.org](http://www.aasmnet.org)

### **American College of Chest Physicians**

3300 Dundee Rd  
Northbrook, IL 60062-2348  
Téléphone : (847) 498-1400 ou (800) 343-2227  
Fax : (847) 498-5460  
[www.chestnet.org](http://www.chestnet.org)

### **The Sleep Apnoea Trust**

12a Bakers Piece,  
Kingston Blount  
Oxon.  
OX39 4SW  
Tel: +44 845 60 60 685  
[www.sleepapnoea-trust.org](http://www.sleepapnoea-trust.org)

### **National Heart, Lung & Blood Institute Information Center**

P.O. Box 30105  
Bethesda, MD 20824-0105  
Téléphone : (301) 592-8573  
Fax: (240) 629-3246 [www.nhlbi.nih.gov](http://www.nhlbi.nih.gov)

### **American Academy of Neurology**

1080 Montreal Avenue  
St. Paul, Minnesota 55116  
Téléphone : (651) 695-2717 ou (800) 879-1960  
Fax: (651) 695-2791  
[www.aan.com](http://www.aan.com)

### **American Sleep Apnea Association**

1424 K Street NW, Suite 302  
Washington, DC 20005  
Téléphone : (202) 293-3650  
Fax: (202) 293-3656 w  
[www.sleepapnea.org](http://www.sleepapnea.org)

### **National Center on Sleep Disorder Research National Heart Lung & Blood Institute (NIH)**

6701 Rockledge Drive  
Bethesda, MD 20892  
Téléphone : (301) 435-0199  
Fax: (301) 480-3451  
[www.nhlbi.nih.gov/sleep](http://www.nhlbi.nih.gov/sleep)

### **National Sleep Foundation**

1522 K Street, NW, Suite 500  
Washington, DC 20005  
Téléphone : (202) 347-3471  
Fax: (202) 347-3472  
[www.sleepfoundation.org](http://www.sleepfoundation.org)

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### Déballage de l'appareil

Le système IntelliPAP de DeVilbiss est livré avec les éléments suivants :

1. Appareil IntelliPAP
2. Lot de filtres de rechange
3. Câble d'alimentation CA
4. Sac de transport
5. Tube d'alimentation en air
6. Manuel de l'utilisateur
7. DVD

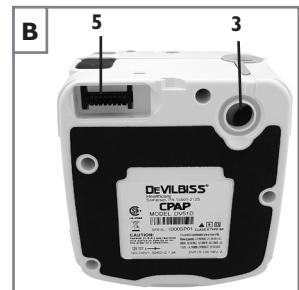
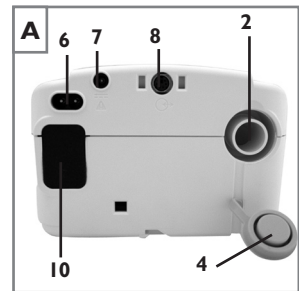
Veuillez contacter votre prestataire de soins à domicile s'il vous manque un ou plusieurs des éléments indiqués ci-dessus.

**REMARQUE**-Si un humidificateur vous a été livré avec votre système IntelliPAP, veuillez vous reporter au guide d'instructions de l'humidificateur pour toute information supplémentaire.

### Appareil IntelliPAP de DeVilbiss


(Figure A and B)

1. Clavier/Écran de commandes LCD (Figure C)
2. Entrée d'air à l'arrière
3. Entrée d'air en bas (pour humidificateur en option)
4. Prise d'entrée d'air
5. Connecteur d'alimentation du réchauffeur (pour humidificateur en option)
6. Connecteur d'alimentation CA
7. Connecteur d'alimentation CC
8. Port de transmission des données
9. Câble d'alimentation (compatible pour prise murale) (non illustré)
10. Entrée du filtre à air



### Clavier (Figure C)

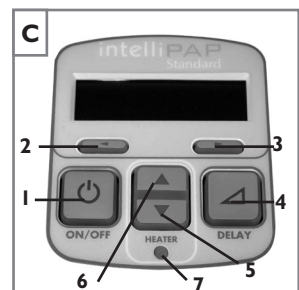1. Marche/arrêt
2. Option précédente
3. Option suivante
4. Fonction Delay
5. Permet de diminuer la valeur de réglage
6. Permet d'augmenter la valeur de réglage
7. Voyant DEL de marche du réchauffeur (pour humidificateur en option)



Contactez votre prestataire de soins à domicile pour toute information sur les masques, le matériel, et les accessoires DeVilbiss disponibles.

## ASSEMBLAGE DU SYSTÈME SANS HUMIDIFICATEUR

**REMARQUE**—Si votre système inclut un humidificateur, veuillez vous reporter à son mode d'emploi sur l'assemblage et le fonctionnement.

1. Repérez l'entrée d'air et le connecteur pour réchauffeur situé en bas de l'appareil IntelliPAP. Vérifiez que tous les orifices sont protégés par le couvercle de protection souple approprié.
2. Placez l'appareil IntelliPAP sur une surface stable, une table de nuit ou une table par exemple. Si vous placez l'appareil sur le sol près du lit, assurez-vous qu'on ne peut pas le renverser ou marcher dessus. Assurez-vous que l'entrée d'air à l'arrière de l'appareil n'est pas obstruée, par exemple par des rideaux ou la literie.

**REMARQUE**—Ne placez jamais l'appareil IntelliPAP en fonctionnement sur une surface molle, par exemple un lit ou un fauteuil.

**ATTENTION**—Le système IntelliPAP doit toujours se trouver à un niveau inférieur à celui du masque lors de l'utilisation d'un humidificateur afin d'empêcher l'eau de pénétrer dans le masque CPAP.

3. Insérez le câble d'alimentation à l'arrière de l'appareil. Veillez à insérer complètement une extrémité du câble d'alimentation dans le connecteur. Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation sur une prise murale CA.
4. Fixez le tube d'alimentation en air sur l'interface d'alimentation en air située à l'arrière de l'appareil.
5. Préparez le masque (fourni par votre prestataire de soins à domicile) conformément au guide d'instructions sur le masque.
6. Connectez le tube d'alimentation en air au masque.

**REMARQUE**—Le tube d'alimentation en air fourni avec l'appareil est spécialement conçu pour ne pas s'enrouler et pour permettre un débit d'air régulier. Utilisez uniquement le tube de 22 mm de diamètre, à parois lisses résistant à l'enroulement fourni avec cet appareil ou un tube recommandé par votre prestataire de soins à domicile.

## Clavier et Affichage

Touches de commandes de base de l'appareil de DeVilbiss IntelliPAP		
Nom	Symbole	Fonction
ON/OFF		La touche ON/OFF (marche/arrêt) permet d'activer ou d'arrêter le débit d'air délivré par l'appareil.
HEATER		Si votre appareil IntelliPAP est doté d'un humidificateur/réchauffeur intégré, ces touches servent au réglage du réchauffeur. Elles permettent d'augmenter la valeur de réglage pour obtenir plus d'humidification et de la diminuer pour moins d'humidification.
DELAY		La touche Delay active la fonction de délai confort. Cette fonction n'est disponible que si elle est activée. Pour régler les paramètres de la fonction de délai, veuillez vous reporter à la section Utilisation de la fonction de délai confort (« Comfort Delay ») à la page 58.

**REMARQUE**—Les autres touches du panneau de commande de l'appareil IntelliPAP permettent d'afficher des commandes détaillées de réglage spécifique. Veuillez vous reporter à la section Utilisation du menu détaillé à la page 59 pour toute information complémentaire.

## MODE DE FONCTIONNEMENT

### Démarrage

Avant de commencer le traitement, vérifiez que l'appareil IntelliPAP est sous tension. Lorsque que l'appareil est branché, l'affichage LCD apparaît comme indiqué.

Mettez votre masque de traitement par CPAP/PPC et appuyez sur la touche ON/OFF du clavier pour activer le débit d'air OU respirez profondément plusieurs fois dans le masque pour activer le débit d'air automatiquement. La pression dans le masque augmente jusqu'à la pression de réglage en une dizaine de secondes.

**REMARQUE**—Si l'appareil ne démarre pas automatiquement après 2 ou 3 inspirations, cette fonction a été probablement désactivée. Si la fonction Auto ON/OFF est désactivée, appuyez sur la touche ON/OFF pour démarrer ou arrêter l'appareil.

La mesure de la pression réelle dans le masque s'affiche lorsque l'appareil est utilisé. Cette mesure, correspondant à la pression réelle dans le masque, peut varier légèrement lorsque vous respirez. La mesure de la pression s'affiche comme indiqué.

Si le système IntelliPAP de DeVilbiss est équipé d'un humidificateur, les touches de commande du réchauffeur et l'état du réchauffeur s'affichent comme indiqué.

**REMARQUE**—Si l'affichage de l'appareil diffère de l'affichage ci-dessus, reportez-vous à la section Messages Patient à la page 62.

### Utilisation de la fonction de délai confort

L'appareil IntelliPAP est doté d'une fonction de délai confort pour vous permettre de vous endormir plus facilement. L'appareil augmente progressivement la pression en passant d'une pression basse à la pression prescrite pour le traitement pendant les dernières minutes de la durée de délai sélectionnée.

**REMARQUE**—Lorsque la fonction de délai confort est activée, un message s'affiche périodiquement pour indiquer la durée de délai restante.

Ajustez la durée de délai confort au moyen des touches de commande avancée de l'appareil. La durée peut être réglée de 0 à 45 minutes par incréments de 5 minutes. Reportez-vous à la page 59 pour des informations détaillées.

**REMARQUE**—Si le réglage de la durée de délai ne peut pas être modifié, c'est que cette fonction a été verrouillée par votre prestataire de soins. Reportez-vous au guide sur le menu du clavier à la page 59 pour des informations détaillées.

Appuyez sur la touche de délai pour activer la fonction de délai confort. La pression du débit d'air tombe au niveau de la pression de réglage de la fonction « délai confort ».

Pendant les dix dernières minutes de la durée de délai, la pression augmente progressivement pour passer à la pression de traitement prescrite. La fonction de délai peut être réinitialisée en appuyant de nouveau sur la touche Delay si vous ne vous êtes pas endormi(e).




## Arrêt du traitement

Appuyez sur la touche ON/OFF pour arrêter l'appareil. Vous pouvez également arrêter le traitement en retirant simplement votre masque. Au bout de quelques secondes le message « Pb masque. Vérif. taille » s'affiche. Si vous ne remettez pas le masque, l'appareil s'arrête automatiquement au bout de 20 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche pour effacer le message.

**REMARQUE**—Si l'appareil IntelliPAP de DeVilbiss ne s'arrête pas automatiquement, cette fonction a été probablement désactivée. Si la fonction est désactivée, arrêtez l'appareil manuellement.

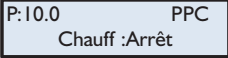
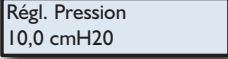
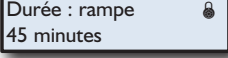
## UTILISATION DU MENU DÉTAILLÉ

Mettez l'appareil en marche, appuyez sur les touches Next (suivant) ou Previous (précédent) du clavier pour naviguer dans le menu d'affichage. Certaines fonctions sont en option et d'autres dépendent de sélections faites par votre médecin ou prestataire de soins à domicile. Le tableau ci-dessous montre les touches du clavier et indique leurs fonctions.

Nom :	Symbole	Fonction
PREVIOUS ITEM (OPTION PRÉCÉDENTE)		Appuyez sur cette touche pour afficher les options du menu précédent.
NEXT ITEM (OPTION SUIVANTE)		Appuyez sur cette touche pour afficher les options du menu suivant.
SETTING CHANGE (MODIFIER LE RÉGLAGE)		Ces touches permettent de modifier les valeurs de réglage affichées.

Notez que les valeurs illustrées ne sont données qu'à titre d'exemple.

## Menu détaillé

Exemple d'affichage	Description
	Cet écran s'affiche par défaut lorsque l'appareil IntelliPAP est mis en marche. La pression réelle dans le masque et l'état du réchauffeur s'affichent. La mesure de pression affichée peut varier légèrement avec la respiration. Si le système de réchauffage n'est pas connecté, aucune valeur de réglage ne s'affiche.
	Réglage prescrit contrôlant la pression de fonctionnement.
	Réglage de la durée de délai. Votre prestataire a réglé la durée de délai. Si le symbole « Verrou ouvert » s'affiche, vous pouvez modifier le réglage. Si le symbole « Verrou fermé » s'affiche, seul votre prestataire de soins peut modifier le réglage.

Exemple d'affichage	Description
Pression rampe 5 cm H2O	Réglage prescrit contrôlant la pression de fonctionnement pendant la durée de délai.
Activer Menu Appuyez sur ▼	Appuyez sur la touche de défilement vers le bas pour activer le menu. Reportez-vous à la section suivante Activer le menu pour des informations détaillées.
Régl. Contraste 50 %	Cette fonction permet de modifier le contraste de l'écran LCD. Réglez le contraste uniquement si vous éprouvez des difficultés à voir ce qui s'affiche sur l'écran de votre point de vue.
Mes. Observance 123456,7 heures	Nombre total d'heures (par incréments de 1/10 d'heure) de traitement dispensés par l'appareil IntelliPAP.
Compteur horaire 123456,7 heures	Nombre total d'heures (par incréments de 1/10 d'heure) de fonctionnement de l'appareil IntelliPAP.
Version logiciel V0.09 05/01/2007	Affiche la version du logiciel installé.
Numéro de série HD123456	Affiche le numéro de série de l'appareil.
SmartCode FF28D9	SmartCode™ est utilisé pour assurer le suivi d'observation du traitement, les informations d'observation du traitement sont codées sous forme de séries de lettres et de nombres, incluant un caractère spécial de détection d'erreur permettant d'assurer l'exactitude des données fournies à votre médecin.

## Menu d'activation

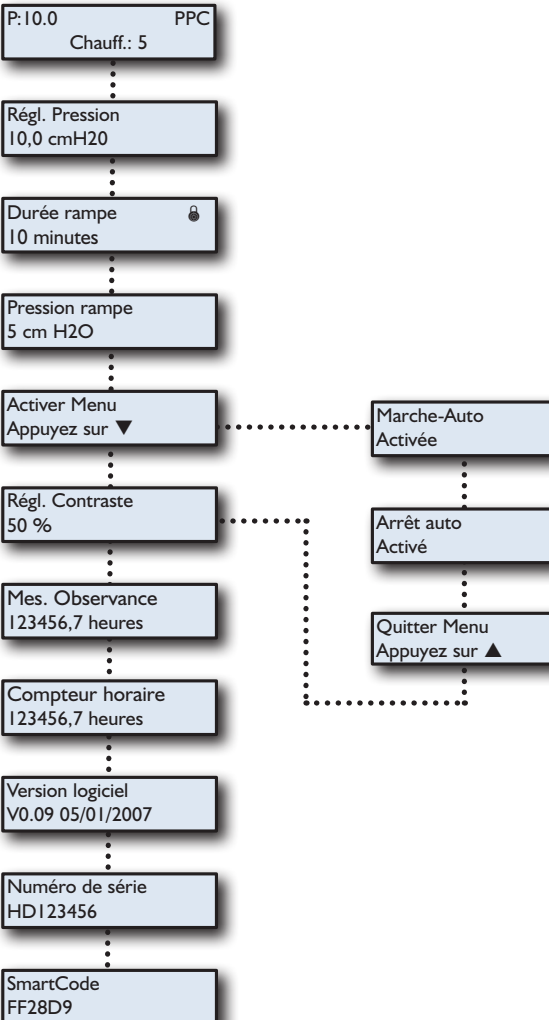
Le menu d'activation est disponible pour tous les modes. Il s'agit d'un sous-menu qui permet de régler les différentes fonctions de l'appareil IntelliPAP. Appuyez sur la touche de défilement vers le bas lorsque vous vous trouvez dans le Menu détaillé.

Exemple d'affichage	Description
Marche-Auto Activée	Cette option contrôle la fonction Auto-On, qui active automatiquement le débit d'air après une ou deux respirations dans le masque.
Arrêt auto Activé	Cette option contrôle la fonction Auto-OFF, qui arrête automatiquement le débit d'air lorsque le masque est retiré. En fonction du masque utilisé il peut se passer jusqu'à 30 secondes avant que l'appareil S'ARRÊTE.
Quitter Menu Appuyez sur ▲	Appuyez sur la touche de défilement vers le haut pour quitter le Menu d'activation.

## Menu patient

Le tableau suivant illustre les options affichées par Mode que vous pouvez faire défiler en appuyant sur les touches Next (option suivante) ou Previous (option précédente) du clavier. Si vous appuyez sur la touche de défilement vers le bas lorsque s'affiche Activer Menu vous pourrez naviguer dans un sous-menu en appuyant sur les touches de défilement Next ou Previous. Appuyez sur la touche de défilement vers le haut pour revenir au menu principal. Lorsque la dernière option s'affiche, appuyez sur la touche Next pour revenir à la première option.

### CPAP MENU



## MESSAGES POUR LE PATIENT

L'appareil IntelliPAP prévient de tout problème nécessitant une intervention de votre part pour rendre le traitement plus efficace. Ces messages s'affichent lorsque l'appareil est mis en marche, soit en appuyant sur la touche ON/OFF, soit en respirant dans le masque. Pour effacer un message, appuyez sur n'importe quelle touche. Même si un message n'est pas effacé, l'appareil IntelliPAP fonctionne normalement.

Deux types de messages s'affichent : Rappels et Notifications.

### Rappels

Les messages de rappel vous préviennent que certaines pièces du système doivent être remplacées. Certains composants de votre système s'usent. S'ils ne sont pas remplacés, votre traitement peut en être affecté. Si le message qui s'affiche n'est pas indiqué ci-dessous, le module en option SmartLink™ de DeVilbiss est sans doute branché sur votre appareil et vous fournit des messages supplémentaires. Reportez-vous à la documentation fournie avec le module SmartLink.

**Nettoyage du filtre** – Vérifiez l'état du filtre tous les dix jours pour enlever toute saleté et vous assurer qu'il n'est pas usé. Le message ci-contre vous rappelle de vérifier régulièrement l'état du filtre.

Nettoyer filtre

### Notifications

Les notifications indiquent un état de votre appareil IntelliPAP nécessitant une intervention de votre part ou de votre prestataire de soins à domicile afin d'assurer une qualité optimale de traitement. Si le message qui s'affiche n'est pas indiqué ci-dessous, le module en option SmartLink™ de DeVilbiss est sans doute branché sur votre appareil et vous fournit des messages supplémentaires. Reportez-vous à la documentation fournie avec le module SmartLink.

**REMARQUE**—Notez que les valeurs affichées ne sont données qu'à titre d'exemple.

**Durée de délai en cours** – xx minutes restantes) – Lorsque la fonction de délai confort est activée, ce message clignote sur l'écran toutes les 5 secondes pour vous indiquer la durée de délai restante.

Rampe en cours  
10 min de plus

**Problème de masque** – Ce message s'affiche à chaque fois qu'un débit d'air élevé est enregistré. Un débit d'air élevé est causé habituellement par un masque mal ajusté ou qui a été retiré.

Pb masque  
Vérifier masque

Vérifiez le masque pour détecter toute fuite et ajustez-le conformément aux instructions du fabricant. Le message ci-contre s'affiche jusqu'à la correction du problème de débit d'air élevé. Si le débit d'air continue à être élevé pendant plus de 20 secondes, l'appareil s'arrête automatiquement (si la fonction AutoOFF est activée).

**Panne de l'appareil** – Si un message de panne s'affiche, reportez-vous à la section Dépannage pour toute instruction détaillée.

Panne App. E07  
Appeler SAV

## INFORMATION SUR L'UTILISATION DE L'APPAREIL INTELLIPAP EN VOYAGE

### Variation de la tension du courant électrique à l'étranger

Votre appareil IntelliPAP de DeVilbiss est équipé d'une source d'alimentation universelle. Il peut fonctionner automatiquement avec des courants/fréquences de 100 à 240 V~ 50/60Hz et 120V~ 400Hz. Aucun réglage spécial n'est requis si vous voyagez dans un pays où la tension du courant électrique est différente de celle que vous utilisez. Contactez votre prestataire de soins à domicile pour obtenir le câble d'alimentation avec adaptateur approprié au pays dans lequel vous voyagez (reportez-vous à la section Accessoires/Pièces de rechange pour obtenir le numéro de référence correspondant).

### Altitude

Votre appareil IntelliPAP compense automatiquement les variations d'altitude du niveau de la mer jusqu'à 2750 mètres (9000 pieds). Aucun réglage spécial n'est requis en cas de variations d'altitude.

## FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL INTELLIPAP EN CC

### Batterie

L'appareil IntelliPAP peut fonctionner à partir d'une source d'alimentation 12 Vcc dans une autocaravane, un bateau ou tout autre véhicule de plaisance. L'appareil peut être branché à la source d'alimentation avec un câble d'alimentation 12 Vcc ou fonctionner à partir d'une batterie autonome 12 Vcc. Ces deux pièces sont disponibles auprès de votre prestataire de soins à domicile (reportez-vous à la section Accessoires/Pièces de rechange pour obtenir le numéro de référence correspondant). Deux câbles sont nécessaires pour un fonctionnement sur batterie autonome. L'équipement de connexion pour fonctionnement autonome sur batterie comporte des pinces permettant le branchement aux bornes de la batterie.

**REMARQUE**—Le système d'humidification chauffante de l'appareil IntelliPAP ne fonctionne pas directement sur une source d'alimentation 12 Vcc. Si vous avez besoin d'un système d'humidification, une humidification par léchage est disponible. Toutefois, au lieu de connecter directement l'alimentation 12 Vcc à l'IntelliPAP, vous pouvez la connecter à un convertisseur de courant continu en courant alternatif qui délivrera un courant CA à l'appareil. Ce qui permettra d'activer le réchauffeur. La puissance nominale du convertisseur doit être de 200 watts @ 110V~ / 400 watts @ 220V~ au minimum.

**REMARQUE**—l'appareil IntelliPAP passera automatiquement d'une source à l'autre (CA à 12 Vcc) si elles sont disponibles. Si votre appareil est connecté à la fois sur CA et 12 V CC, il fonctionne en mode CA tant que le câble d'alimentation CA est branché et passe automatiquement en mode 12 Vcc si la source en CA n'est plus disponible. Lorsque la source en CA est restaurée, aucun réglage n'est requis pour passer d'une source à l'autre, mais n'oubliez pas que le réchauffeur ne fonctionne pas sur une source 12 vcc.

## OXYGÈNE D'APPOINT

Un appoint d'oxygène est parfois prescrit en complément d'un traitement par CPAP/PPC de l'apnée obstructive du sommeil. Si votre médecin prescrit de l'oxygène, cet appoint peut être délivré de deux manières :

1. Demandez à votre prestataire de soins à domicile de vous fournir un adaptateur en option pour oxygène (réf. 7353D-601) et connectez l'adaptateur à la prise de sortie de l'appareil IntelliPAP. Branchez un côté du tube d'alimentation en air sur l'extrémité libre de l'adaptateur et l'autre côté sur le masque.
2. Si votre masque est équipé d'une prise pour oxygène, votre médecin peut prescrire un appoint d'oxygène délivré directement dans le masque.



### AVERTISSEMENT – UTILISATION D'OXYGÈNE

**L'oxygène favorise la combustion. Pour éviter toute blessure, ne fumez pas lorsque vous utilisez cet appareil avec un appoint d'oxygène. N'utilisez pas l'appareil près d'objets chauds, de matières volatiles ou de sources d'inflammation.**

**Mettez toujours l'appareil IntelliPAP sous tension avant d'activer la source d'oxygène. Arrêtez la source d'oxygène avant d'arrêter l'appareil IntelliPAP.**

**Cet appareil ne peut pas être utilisé en présence d'un mélange anesthésique inflammable contenant de l'air, de l'oxygène ou de l'oxyde d'azote.**

**À un taux fixe d'oxygène d'appoint, la concentration de l'oxygène inhalé peut varier en fonction du réglage de pression, du mode de respiration du patient, du type de masque choisi et du taux de fuite. Cet avertissement s'applique à la plupart des appareils de traitement par CPAP/PPC.**

**Ne laissez jamais une source d'oxygène connectée à l'appareil IntelliPAP fonctionner en continu lorsque ce dernier n'est pas en usage. Si l'appareil IntelliPAP n'est pas utilisé, arrêtez le débit d'oxygène.**

**ATTENTION**—*L'oxygène est un gaz fourni sur ordonnance seulement et qui ne doit être administré que sous la surveillance d'un médecin.*

**ATTENTION**—*Le débit de la source d'oxygène doit être spécifié par un médecin.*

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

### Pièces de rechange

Filtre d'entrée d'air (paquet de 4).....	DV51D-602
Filtre à particules fines en option (paquet de 4) .....	DV51D-603
Tube d'alimentation en air (6 pieds) .....	7351D-616
Prise d'entrée d'air .....	DV51D-604
Couvercle de connexion du réchauffeur .....	DV51D-605
Adaptateur pour oxygène .....	7353D-601
Sac de transport .....	DV51D-610

### Accessoires pour l'alimentation électrique

#### Câbles d'alimentation CA

États-Unis.....	DV51D-606
Europe, à l'exception du Royaume-Uni. ....	DV51D-607
Royaume-Uni .....	DV51D-608
Australie .....	DV51D-609
Câble d'alimentation CC .....	DV51D-619
Pincés de batterie CC – sur adaptateur .....	DV51D-696

### Masques recommandés pour une utilisation avec l'appareil IntelliPAP de DeVilbiss :

Masque FlexSet® de DeVilbiss.....	9354D
Masque FlexSet® de DeVilbiss peu profond .....	9354S
Masque FlexSet® de DeVilbiss à gel.....	9354G
Masque FlexSet® de DeVilbiss à gel peu profond.....	9354GS
Masque FlexAire® de DeVilbiss .....	9353D
Masque FlexAire® de DeVilbiss peu profond .....	9353S
Masque Serenity® de DeVilbiss.....	9352D
Masque Serenity® de DeVilbiss peu profond.....	9352S
Masque Serenity® de DeVilbiss à gel .....	9352G
Masque Serenity® de DeVilbiss à gel peu profond .....	9352GS

### Humidificateur chauffant en option

Humidificateur chauffant de DeVilbiss (support et réservoir) .....	DV5HH
--	-------

## ENTRETIEN DE L'APPAREIL INTELLIPAP



### DANGER

**Danger de décharge électrique – N'ouvrez pas et ne démontez pas le boîtier ; il ne contient aucun composant interne réparable par l'utilisateur. Pour toute réparation nécessaire, contactez votre prestataire de soins à domicile pour obtenir des informations sur la marche à suivre. Toute ouverture ou réparation non autorisée de l'appareil annule la garantie.**



### AVERTISSEMENT

**Si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou produit des sons inhabituels, arrêtez de l'utiliser et contactez votre prestataire de soins.**

**Si l'appareil est tombé, vérifiez son bon fonctionnement. Si l'appareil ne fonctionne pas ou si son boîtier est endommagé arrêtez de l'utiliser et contactez votre prestataire des soins.**

**Si l'appareil semble ne pas fonctionner normalement, reportez-vous à la section Dépannage pour obtenir des instructions détaillées.**

**Exactitude de la mesure de pression** – l'appareil IntelliPAP qui a été étalonné en usine est conçu pour fournir une mesure exacte de la pression, aucun réglage supplémentaire n'est requis. Aucun entretien de routine n'est requis pendant une période d'utilisation de 2 ans si l'appareil est utilisé conformément aux directives du fabricant. Après 2 ans d'utilisation, l'appareil doit être vérifié.

**REMARQUE**—Certains pays exigent un entretien et un étalonnage réguliers pour ce type d'appareil médical. Contactez votre prestataire de soins à domicile pour obtenir toute information complémentaire.

**Filtre d'entrée d'air standard** – Vérifiez l'état du filtre tous les 10 jours et nettoyez-le si nécessaire. Remplacez le filtre tous les 6 mois ou plus tôt s'il est endommagé. Le filtre standard sert à filtrer les particules de plus de 3 microns. Il doit se trouver sur l'appareil IntelliPAP pendant le fonctionnement de celui-ci.

**Filtre à particules fines en option** – Vérifiez l'état du filtre tous les 10 jours et remplacez-le s'il est sale ou endommagé. Sinon remplacez-le tous les 30 jours. Le filtre à particules fines en option sert à filtrer les particules à partir de 0,3 micron.

**Entretien du filtre** – Reportez-vous à la section Nettoyage pour obtenir des instructions détaillées.

## NETTOYAGE DE L'APPAREIL INTELLIPAP



### AVERTISSEMENT

**Pour éviter toute décharge électrique, débranchez toujours l'appareil de la prise murale.**

**ATTENTION**—*Ne rincez jamais l'appareil et ne le mettez jamais dans l'eau. Ne laissez jamais de liquide pénétrer dans l'appareil ou près des ports d'entrée-sortie, interrupteurs ou filtre à air, car cela endommagerait l'appareil. Si de l'eau pénètre dans l'appareil arrêtez de l'utiliser. Contactez votre prestataire de soins à domicile pour le réparer.*

### Boîtier de l'appareil

1. Débranchez l'appareil IntelliPAP. Essuyez le boîtier avec un chiffon propre et humide tous les deux ou trois jours pour qu'aucune poussière ne s'accumule.
2. Laissez sécher complètement l'appareil avant de le rebrancher.

### Filtres

#### Filtre d'entrée d'air (standard)

1. L'état du filtre d'entrée d'air doit être vérifié tous les dix jours. Nettoyez-le si nécessaire. Le filtre se trouve à l'arrière de l'appareil.

**ATTENTION**—*Il est important que le filtre soit en bon état pour que l'appareil puisse fonctionner normalement et éviter tout endommagement.*

2. Pour le nettoyer, retirez le filtre extérieur en mousse de son cadre.
3. Lavez le filtre dans un mélange d'eau tiède et de détergent à vaisselle. Rincez-le à l'eau du robinet. Laissez le filtre sécher complètement. Si le filtre (réf. DV51D-602) est endommagé, contactez votre prestataire de soins à domicile pour obtenir un filtre de rechange.
4. Assurez-vous que le filtre est complètement sec avant de l'installer et de l'utiliser.

#### Filtre à particules fines (en option)

1. Si l'appareil est équipé d'un filtre à particules fines en option (réf. DV51D-603), vérifiez son état et remplacez-le s'il est sale ou endommagé. Ne lavez pas ce filtre.
2. Installez le filtre à particules fine derrière le filtre standard.

**REMARQUE**—*Si le filtre à particules fines n'est pas installé conformément aux instructions cela réduira sa durée de vie et il sera nécessaire de le remplacer plus souvent.*

### Tube

Nettoyez le tube d'alimentation en air tous les jours. Enlevez le tube et le harnais du masque. Utilisez un mélange d'eau et de détergent doux pour nettoyer l'intérieur du tube. Rincez le tube et laissez-le sécher à l'air.

### Masque et Harnais

Nettoyez le masque et le harnais conformément aux instructions du fabricant.

## DÉPANNAGE

**DANGER**

**Danger de choc électrique - Ne pas retirer le boîtier de l'appareil, il ne contient aucun composant interne réparable par l'utilisateur. Le boîtier ne doit être retiré que par un technicien DeVilbiss.**

Pour tout problème de fonctionnement de votre appareil IntelliPAP de DeVilbiss, reportez-vous à la liste de problèmes, causes possibles et solutions indiqués dans le tableau suivant. Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème après avoir essayé les suggestions ci-dessus, contactez votre prestataire de soins.

Problème	Cause possible	Solution
Aucun message ne s'affiche.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'appareil n'est pas branché ou le câble d'alimentation n'est pas inséré complètement.</li> <li>2. L'appareil n'est pas alimenté.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 a. Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché sur l'appareil IntelliPAP et sur la source d'alimentation.</li> <li>1 b. Si vous utilisez une source CC vérifiez que les connexions du câble sont sûres. Vérifiez que la batterie est chargée.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Repérez une source d'alimentation appropriée.</li> </ol>
L'appareil IntelliPAP ne démarre pas lorsque vous respirez dans le masque.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La fonction Auto ON (démarrage automatique) a été désactivée.</li> <li>2. L'appareil n'est pas alimenté.</li> <li>3. Vous ne respirez pas suffisamment profondément pour que la fonction Auto ON puisse le détecter.</li> <li>4. Vous utilisez un masque complet équipé d'une valve anti-asphyxie.</li> <li>5. La prise d'entrée d'alimentation en air n'est pas installée ou n'est pas complètement insérée.</li> <li>6. Le réservoir de l'humidificateur n'est pas installé ou n'est pas complètement inséré dans le support.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez sur la touche ON/OFF (marche-arrêt) pour mettre en marche et arrêter l'appareil.</li> <li>2. Vérifiez que le câble d'alimentation est bien branché sur l'appareil IntelliPAP et sur la source d'alimentation.</li> <li>3. Respirez profondément pour mettre en marche l'appareil IntelliPAP.</li> <li>4. La fonction Auto ON peut ne pas marcher car l'air expiré s'échappe de la valve ouverte. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche et arrêter l'appareil.</li> <li>5. Vérifiez que la prise d'entrée d'alimentation en air est complètement insérée dans l'appareil.</li> <li>6. Insérez entièrement le réservoir de l'humidificateur dans le support. Vérifiez que le levier de verrouillage s'enclenche.</li> </ol>

Problème	Cause possible	Solution
Le débit d'air s'est arrêté soudainement pendant l'utilisation de l'appareil.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La fonction Auto-Off a détecté un débit d'air important car le masque n'est pas correctement ajusté.</li> <li>2. Pendant l'utilisation de l'appareil, vous ouvrez la bouche et votre respiration est buccale.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assurez-vous que la taille du masque est appropriée, ajustez au besoin le masque et le harnais.</li> <li>2. Contactez votre prestataire de soins pour obtenir une mentonnière ou un masque différent afin d'empêcher une respiration buccale.</li> </ol> <p>Si les solutions ci-dessus ne parviennent pas à résoudre le problème, désactivez la fonction Auto-Off dans le menu détaillé.</p>
L'écran affiche un message de panne.	Une erreur s'est produite et l'appareil doit être réparé.	Contactez votre prestataire de soins à domicile pour réparer l'appareil.
Les symptômes d'apnée réapparaissent.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le filtre à air est peut-être obstrué.</li> <li>2. Les symptômes d'apnée ont changé.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nettoyez ou remplacez le filtre à air et placez l'appareil dans un endroit éloigné de tout rideau ou de toute surface poussiéreuse.</li> <li>2. Appelez votre médecin.</li> </ol>
Votre peau est irritée au contact du masque.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le harnais est trop serré ou mal ajusté.</li> <li>2. La taille du masque ou sa forme sont inappropriées pour votre visage.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desserrez le harnais pour diminuer la pression de contact sur le visage.</li> <li>2. Contactez votre médecin ou votre prestataire de soins.</li> </ol>
Sécheresse de la gorge ou du nez.	Le taux d'humidité est inadéquat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajoutez un humidificateur chauffant DeVilbiss DV5.</li> <li>2. Augmentez le niveau d'humidité en réglant l'humidificateur.</li> </ol>
L'eau se condense sur le tube et produit un bruit de gargouillement.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le taux d'humidité est trop élevé.</li> <li>2. La température de la pièce monte et descend pendant la nuit.</li> </ol>	Diminuez le taux d'humidification et/ou augmentez la température de la pièce.
L'air qui sort du générateur semble trop chaud.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le(s) filtre(s) à air est/sont sales.</li> <li>2. L'entrée d'air est obstruée.</li> <li>3. La température dans la pièce est trop élevée.</li> <li>4. L'appareil IntelliPAP se trouve près d'un radiateur.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reportez-vous à la section Nettoyage pour des instructions sur l'entretien des filtres.</li> <li>2. Débouchez l'entrée d'air.</li> <li>3. Baissez la température dans la pièce.</li> <li>4. Placez l'appareil loin du chauffage pour que l'air entrant dans l'appareil soit à température ambiante.</li> </ol> <p>Si le problème persiste, contactez votre prestataire de soins à domicile.</p>
Douleurs nasales, des sinus, des oreilles, ou nez qui coule.	Il est possible que cette réaction soit causée par la pression du débit d'air.	Arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez votre médecin.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille (HxLxP).....	10,7 cm x 16,5 cm x 17,5 cm
Poids .....	1,22 kg ( 2,7 lb)
Configuration électrique .....	100-240 V~, 50/60 Hz
Consommation électrique maximale .....	65 watts max pour une source en CA (générateur de flux uniquement)
Plage des pressions.....	3-20 cmH <sub>2</sub> O
Plage des températures de fonctionnement .....	5°C à 40°C
Taux d'humidité limite de fonctionnement .....	0 % à 95 % HR (sans condensation)
Conditions atmosphériques de fonctionnement.....	Du niveau de la mer jusqu'à 9 000 pieds
Température de stockage et de transport .....	-40 °C à +70 °C
Taux d'humidité limite pour le stockage et le transport.....	0 % à 95 % H R (sans condensation)
Pression limitée maximale.....	20 cm H <sub>2</sub> O en utilisation normale
Niveau sonore (conforme aux exigences de la norme ISO 17510).....	26 dBA

### Caractéristiques des filtres

Filtre standard > 3 microns

Filtre à particules fines en option > 0,3 microns

### Débit max

83 l/min..... à 6,5 cm H<sub>2</sub>O (1/3 de pression max.)

134 l/min..... à 13 cm H<sub>2</sub>O (2/3 de pression max.)

163 l/min..... à 20 cm H<sub>2</sub>O (pression max.)

Exactitude de la pression .....

± 1,0 cmH<sub>2</sub>O

### Variations de la pression

(cm H<sub>2</sub>O crête à crête à un volume respiratoire de 500 ml, profil d'onde sinusoïdal)

Respirations par minute	10	15	20
à 6,5 cm H <sub>2</sub> O	0,5	0,6	0,9
à 13 cm H <sub>2</sub> O	1,0	1,0	1,2
à 20 cm H <sub>2</sub> O	1,0	1,0	1,2

Garantie..... Trois ans de garantie limitée

Classification de l'appareil conformément aux  
normes de protection contre les décharges électriques..... Class II

Degré de protection contre les décharges électriques..... Pièce appliquée de type BF

Degré de protection contre la pénétration de liquides .....IPX I

Cet appareil ne convient pas à une utilisation en présence d'un mélange anesthésique inflammable contenant de l'air, de l'oxygène ou de l'oxyde d'azote.

Mode de fonctionnement.....Continu

## Spécifications cliniques des sorties numériques

Pression ..... de 0 à 25,5 cmH<sub>2</sub>O ± 0,5

## GARANTIE

L'appareil IntelliPAP de DeVilbiss est garanti contre tout vice de fabrication et de matériau pendant trois ans à compter de la date d'achat. Toute pièce défectueuse sera réparée ou remplacée, à la discrétion de DeVilbiss à condition que l'appareil n'ait pas été altéré ou utilisé de façon inappropriée pendant cette période. Vérifiez que tout mauvais fonctionnement n'est pas simplement dû à un mauvais nettoyage ou au non-respect des instructions. Si une réparation est nécessaire, contactez votre prestataire DeVilbiss ou le service à la clientèle de DeVilbiss :

États-Unis 800-338-1988, 814-443-4881

Canada 800-263-3390

Europe 44-138-444-6688

**REMARQUE**—*Cette garantie ne couvre pas la fourniture d'un appareil de remplacement, les frais encourus pour la location d'un autre appareil pendant que ledit appareil est réparé, ni le coût de main-d'œuvre pour la réparation ou le remplacement de la (des) pièce(s) défectueuse(s).*

IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE. LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS CELLES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE EXPLICITE, ET DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI. TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST EXCLUE. CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR ET LA SEULE RESPONSABILITÉ ASSUMÉE PAR LE FABRICANT QUANT À DES DOMMAGES INDIRECTS ET SECONDAIRES. TOUTE AUTRE GARANTIE EST EXCLUE DANS LES LIMITES D'EXCLUSION AUTORISÉES PAR LA LOI. CERTAINS ÉTATS INTERDISENT LA LIMITATION DE LA DURÉE DE VALIDITÉ D'UNE GARANTIE IMPLICITE, L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS ET SECONDAIRES ; LA LIMITE ET L'EXCLUSION STIPULÉES CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS CONCERNER L'ACHETEUR.

Cette garantie vous confère certains droits légaux spécifiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits selon votre pays.



**DeVilbiss Healthcare**

100 DeVilbiss Drive  
Somerset, PA 15501-2125  
USA  
800-338-1988  
814-443-4881

**Sunrise Medical Canada, Inc.**

237 Romina Drive, Unit 3  
Concord, Ontario L4K 4V3  
CANADA  
905-660-2459  
800-263-3390

**Sunrise Medical Ltd.**

Sunrise Business Park  
High Street  
Wollaston, West Midlands  
DY8 4PS  
ENGLAND  
44-138-444-6688

**Sunrise Medical Pty. Limited**

15 Carrington Road, Unit 7  
Castle Hill NSW 2154  
AUSTRALIA  
61-2-9899-3144

**Sunrise Medical**

Division Respiratoire  
13 Rue de la Painguetterie  
37390 Chateaux / Choisille  
FRANCE  
33-274-55 44-00

**Sunrise Medical**

DeVilbiss Produkte  
Kahlbachring 2-4  
D-69254 Malsch/Heidelberg  
GERMANY  
49-7253-980-460

DeVilbiss Healthcare • 100 DeVilbiss Drive • Somerset, PA 15501  
800-338-1988 • 814-443-4881 • [www.DeVilbissHealthcare.com](http://www.DeVilbissHealthcare.com)