

Menos es más

FullLife, una mascarilla full face de mínimo contacto, que al ser menos voluminosa resulta más práctica y más cómoda.

Su diseño revolucionario hace de FullLife una gran opción para los hombres y las mujeres que necesitan una mascarilla full face pero prefieren algo más compacto y que no dificulte la visión.

Al crear FullLife, hemos adoptado un enfoque minimalista. La hemos hecho más pequeña y más ligera, pero asegurándonos de que sea duradera. Se ha eliminado la almohadilla convencional de la frente para evitar dificultar la visión.

Hemos reducido las fugas con una nueva almohadilla estriada de doble relieve que crea un sellado fuerte, incluso cuando el paciente se mueve. Nuestro sencillo sistema numerado para colocar paso a paso el arnés reduce la dificultad para poner y quitar la mascarilla al tiempo que mejora su ajuste. Con menos ruido, FullLife hace la vida más cómoda para el paciente. Además, al tener sólo una placa facial de talla única, junto con nuestras opciones FitPack y DuoPack, FullLife le resultará más cómodo también a usted. Al ajustarse al 100% de sus pacientes el 100% del tiempo, le dará a usted menos trabajo, pero le aportará muchísimo más.

Provided for your reference by

cpapXchange.com

PHILIPS

RESPIRONICS



La banda de sujeción a la barbilla garantiza un ajuste seguro y la estabilidad de la mascarilla.

La eliminación de la almohadilla de la frente facilita la visión.

Con el orificio de exhalación integrado, el funcionamiento es sumamente silencioso.

Una placa facial para los 3 tamaños de almohadilla (S, M, L).

Válvula inspiratoria de seguridad que permite un rápido acceso al aire ambiental si la presión baja de 3 cm de H₂O.

Lengüetas para liberación rápida del conector giratorio que permiten desconectar fácilmente el tubo.

Dos conectores giratorios de 360° permiten que el tubo se mueva libremente.


Las marcas y los indicadores de tamaño facilitan la identificación tanto a los pacientes como a los médicos.



Sistema de arnés numerado para colocación paso a paso que facilita el montaje y el uso.

Almohadilla con superficie de doble relieve que facilita el montaje e impide que la mascarilla se mueva en la cara.

Las "varillas" de la almohadilla aportan mayor estabilidad y contribuyen a evitar las fugas hacia los ojos. La almohadilla estriada crea un sellado fuerte adecuado para los movimientos. La aleta SST y el diseño en relieve de la almohadilla aumentan la comodidad.

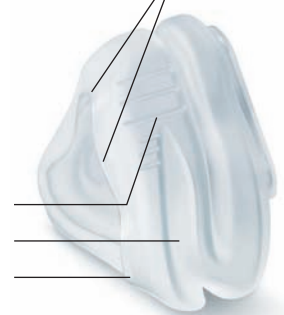

| Artículo | | DuoPack (almohadilla extra del mismo tamaño) | |
|--|-----------------|--|-----------------|
| Mascarilla FullLife | Número de parte | Número de parte | |
| Mascarilla pequeña con arnés | 1047939 | 1052167 | |
| Mascarilla mediana con arnés | 1047940 | 1052168 | |
| Mascarilla grande con arnés | 1047941 | 1052169 | |
| Mascarilla pequeña con arnés, sin orificio de exhalación | 1047943 | | |
| Mascarilla mediana con arnés, sin orificio de exhalación | 1047944 | | |
| Mascarilla grande con arnés, sin orificio de exhalación | 1047995 | | |
| Almohadillas de repuesto | Pequeño | Mediano | Grande |
| Almohadilla FullLife | 1047922 | 1047923 | 1047924 |
| Partes y accesorios | | | Número de parte |
| Sistema de arnés FullLife | | | 1047975 |

Respironics, DuoPack, FitPack y FullLife son marcas registradas de Respironics, Inc. y empresas afiliadas.



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Philips Healthcare se reserva el derecho de modificar las especificaciones y/o de suspender la fabricación de un producto en cualquier momento sin notificación previa y sin que de ello deriven obligaciones; tampoco será responsable de las consecuencias que deriven del uso de la presente publicación.

PRECAUCIÓN: la ley federal de EE. UU. limita la venta de estos dispositivos a médicos o bajo prescripción facultativa.

Broudy KB 9/1/09 MCI 4102608 PN 1065657

Philips Healthcare forma parte de Royal Philips Electronics

Respironics Asia Pacific
+65 6298 1088
Respironics Europa, Medio Oriente, África
+33 1 47 52 30 00

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668

Servicio al cliente
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)
www.philips.com/respironics